

Poznaj swój nowy

MITO LIGHT®

STARTER 5.0

EXPERT 5.0

BIOHACKER 5.0

MITOHACKER 5.0

MASTER 5.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy!

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybranie MITO LIGHT®.

Założyliśmy tę firmę, kierując się wspólną pasją i wspierani przez świetny zespół, a naszą wizją jest wprowadzenie mocy światła czerwonego i bliskiej podczerwieni do codziennego życia.

Produkty MITO LIGHT® są starannie projektowane i opracowywane, aby były najlepsze na rynku, a ich atutem jest wyjątkowa obsługa klienta.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia MITO LIGHT® prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, zachowanie jej na przyszłość, przekazanie jej innym użytkownikom oraz przestrzeganie zawartych w niej wskazówek.

Zespół MITO LIGHT®

Informacje

Urządzenie MITO LIGHT® posiada certyfikaty CE, UKCA i RoHS. Wszystkie podane informacje mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie mają na celu wykazania bezpieczeństwa ani skuteczności urządzenia MITO LIGHT® w diagnostyce, leczeniu lub zapobieganiu jakimkolwiek chorobom. Urządzenie MITO LIGHT® oraz wszystkie podane informacje nie zastępują osobistej konsultacji z lekarzem, nie służą do diagnozowania problemów zdrowotnych i nie powinny być traktowane jako porada medyczna. Przed użyciem należy koniecznie skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli cierpisz na jakieś schorzenia lub przyjmujesz leki. Urządzenie MITO LIGHT® jest przeznaczone wyłącznie do oświetlania. Indywidualne wyniki mogą się różnić.

Spis treści

- 01** Zawartość opakowania
- 02** Opis
- 03** Jak to działa?
- 04** Akcesoria
- 05** Jak korzystać z urządzenia
- 06** Objasnienie symboli
- 07** Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
- 08** Dane techniczne
- 09** Utylizacja
- 10** Deklaracja zgodności
- 11** Gwarancja i reklamacje

Zawartość opakowania

- 1x lampka LED
- 1x kabel zasilający
- 1x kabel zasilający (nie dotyczy modeli Starter 5.0 i Master 5.0)
- 1x okulary ochronne
- 1x system do zawieszania
 - Starter 5.0, Expert 5.0, Biohacker 5.0, Mitohacker 5.0
 - Śruba oczkowa, kołek, regulowany hak do drzwi, stalowe linki z gwintem i karabinkiem, śruby dwustronne, bloczek z liną i karabinkami
 - Master 5.0
 - Stalowy uchwyt ścienny, śruby, podkładki, kołki, śruby dwustronne, plastikowe zaślepki zabezpieczające
- 1x instrukcja obsługi

Najpierw sprawdź, czy zawartość opakowania jest kompletna i nieuszkodzona. W razie wątpliwości nie używaj urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Opakowanie nadaje się do recyklingu lub można je oddać do recyklingu surowców. Prosimy o utylizację niepotrzebnych materiałów opakowaniowych zgodnie z przepisami. Jeśli podczas rozpakowywania zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane transportem, skontaktuj się natychmiast ze sprzedawcą.

Opis

MITO LIGHT®

Starter 5.0 / Expert 5.0 / Biohacker 5.0 / Mitohacker 5.0 / Master 5.0


(zwane dalej „urządzeniem”)

Specyfikacje urządzenia, rozmieszczenie poszczególnych elementów w różnych modelach oraz treść niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w celu ulepszenia funkcji produktu. Zdjęcia poglądowe przedstawiają model MITO LIGHT® Biohacker 5.0.

Urządzenie MITO LIGHT® emituje **światło czerwone i bliskie podczerwieni**. Jest wyposażone w **dwuchipowe diody LED dużej mocy** o optymalnym doborze długości fal, które charakteryzują się sześcioma pikami: **630, 660, 670, 810, 830 i 850 nm**. Wszystkie piki długości fal występują w takich samych proporcjach. Każda dioda LED zawiera jeden chip czerwony i jeden chip bliskiej podczerwieni. Ta kombinacja zapewnia **doskonałą synergę** w postaci światła czerwonego i bliskiej podczerwieni.

Części urządzenia

- | | |
|---|---|
| 1 Wkręty do zawieszenia w pionie | 8 Gwinty do połączenia ze statywem |
| 2 diody LED | 9 Wentylatorów chłodzących |
| 3 Otwory do łączenia urządzeń od spodu | 10 Otwory wentylacyjne |
| 4 Dolne podkładki ochronne | 11 Złącze kabla zasilającego |
| 5 Uchwyt | 12 Złącze kabla zasilającego |
| 6 Ekran dotykowy | 13 Tylne podkładki ochronne |
| 7 Włącznik zasilania | |

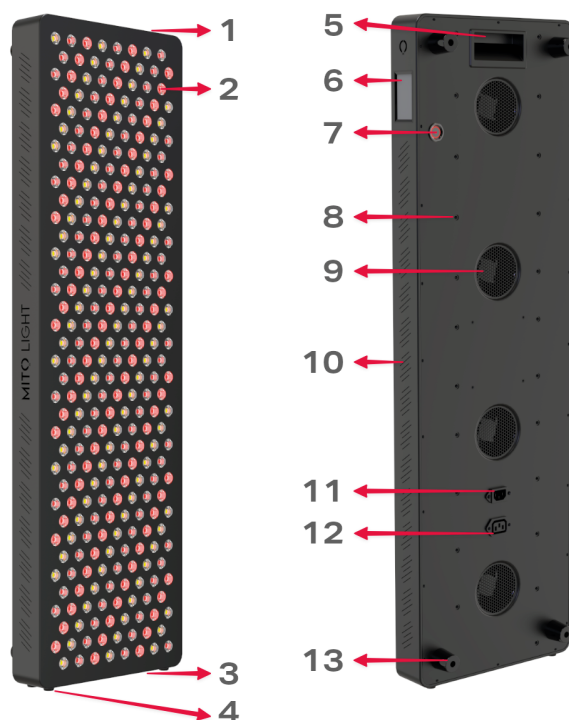

Jak to działa?


Światło czerwone i bliskiej podczerwieni jest pochłaniane przez maleńkie cząsteczki światłoczułe **wewnątrz mitochondriów**, które są **centrami energetycznymi komórki**.

Badania naukowe wskazują, że ta interakcja może **pomóc mitochondriom** pracować wydajniej.

Dzięki temu fale o tych długościach mogą wspomagać takie cele, jak **utrzymanie codziennej witalności**, **nadanie skórze gładkiego i jednolitego wyglądu**, **szybką regenerację po wysiłku fizycznym** oraz **ogólne dobre samopoczucie przy wysokim poziomie energii**.

Jakie są różnice między światłem czerwonym a bliską podczerwienią?

- **Widzialne światło czerwone (RED)** jest wchłaniane głównie przez górne warstwy **skóry**, dlatego zazwyczaj wybiera się je do pielęgnacji powierzchniowej.
- **Niewidzialne światło bliskiej podczerwieni (NIR)** dociera do **głębszych tkanek** i jest często wybierane przez osoby poszukujące relaksu po wysiłku fizycznym lub jasnego, czujnego umysłu.
- W połączeniu **światło czerwone i bliskie podczerwieni wzajemnie się uzupełniają**, docierając zarówno do powierzchni, jak i do głębszych warstw.

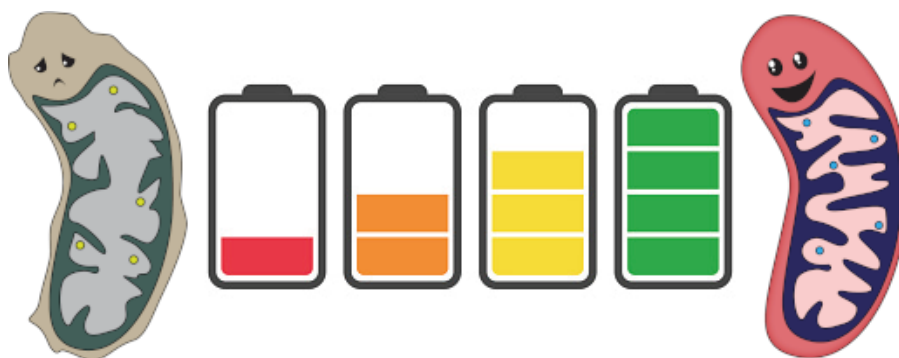

Akcesoria

Kabel zasilający

- Służy do podłączenia urządzenia do gniazdka elektrycznego.

Kabel zasilający

- Służy do podłączenia elektrycznego do innego urządzenia.
- W przypadku korzystania z wielu urządzeń należy podłączyć je do urządzenia podłączonego kablem zasilającym do gniazdka elektrycznego, a następnie podłączyć do kolejnego urządzenia. Każde kolejne urządzenie należy podłączyć za pomocą kabla połączeniowego. Maksymalna liczba urządzeń, które można podłączyć w ten sposób, zależy od obciążalności gniazdka elektrycznego.

Okulary ochronne

- Zalecamy noszenie okularów ochronnych podczas użytkowania. Jednak zgodnie z opiniami klientów większość z nich woli po prostu zamknąć oczy.

System zawieszenia

- Śruba oczkowa, kołek
 - Przeznaczony jest do montażu w ścianie jako stały punkt do zawieszenia urządzenia.
 - Wywiercić otwór w ścianie o wystarczającej nośności, włożyć kołek i wkręcić śrubę oczkową.
- Regulowany hak do drzwi
 - Przeznaczony jest do montażu na drzwiach jako stały punkt do zawieszenia urządzenia.
 - Przymocować hak do drzwi od góry na otwartych drzwiach i dokręcić go za pomocą śruby, aby go zamocować.
- Liny stalowe z gwintami i karabinkiem, śruby dwustronne
 - Służy do połączenia urządzenia z kołem pasowym za pomocą liny w celu zawieszenia urządzenia lub do połączenia dwóch urządzeń umieszczonych poniżej.
 - Mocowanie do koła pasowego – wkręć śruby dwustronne w gwinty znajdujące się na górze urządzenia, a następnie nakręć na nie końcówki stalowych linek.
 - Podłączanie urządzeń – Wkręć śruby dwustronne w górne gwinty dolnego urządzenia. Następnie umieść te śruby w otworach górnego urządzenia, mocując je poprzez dopasowanie wycięć do węższych części otworów, aby unieruchomić urządzenie.
- Blok z liną i karabinkami
 - Zaczep karabinek koła pasowego o haczyk w drzwiach lub śrubę oczkową. Następnie przymocuj drugi karabinek do tego na stalowych linkach.
 - Wyreguluj karabinek, aby ustawić żądaną wysokość zawieszonego urządzenia.

System zawieszenia – Master 5.0

- Stalowy uchwyt ścienny (1 szt.)
- Śruby (4 sztuki)
- Podkładki (4 szt.)
- Kołki (4 szt.)
- Śruby dwustronne (4 szt.)
- Zabezpieczające plastikowe zaślepki (4 szt.)

1. Wybierz wysokość, na której panel zostanie zawieszony na stalowym wsporniku. Minimalna wysokość to 186 cm od podłogi (dolna krawędź wspornika).
2. Umieść wspornik na ścianie (stroną z mniejszymi otworami) w pozycji poziomej i zaznacz środki czterech otworów.
3. Wywierć otwory w ścianie w zaznaczonych miejscach.
4. Włóż kołki do wywierconych otworów.
5. Przymocuj wspornik do ściany za pomocą czterech śrub z podkładkami.
6. Wkręć cztery wkręty dwustronne w górną część panelu Master 5.0.
7. Umieść panel na podłodze tak, aby śruby dwustronne znajdowały się na tej samej osi pionowej co otwory w uchwycie.
8. Podnieś panel, wsuń śruby dwustronne przez szerszą część otworów w uchwycie, a następnie przesun panel w kierunku ściany. Następnie przesun panel w lewo, aż środkowa (węższa) część śrub dwustronnych wpasuje się w węższą część otworów w uchwycie, mocując panel.
9. Przykręć plastikowe zaślepki do śrub dwustronnych.

Jak korzystać z urządzenia

Bezpieczeństwo i konfiguracja



1. Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa (rozdział 7).
2. Rozpakuj urządzenie i umieść je na stabilnej, równej powierzchni, tak aby nie mogło się przewrócić.
3. Podłącz kabel zasilający do urządzenia.
4. Podłącz kabel zasilający do uziemionego gniazdka elektrycznego.
5. Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć urządzenie.

Tryb CLASSIC / INDIVIDUAL

- Użyj tej opcji, jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad czasem i intensywnością.

Ustaw czas trwania sesji

- Naciśnij przycisk „TIME” na ekranie i wybierz **1 – 20 MIN.**
- Naciśnij strzałkę „BACK”, aby powrócić do menu głównego.

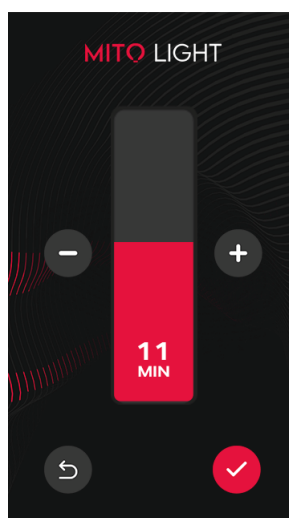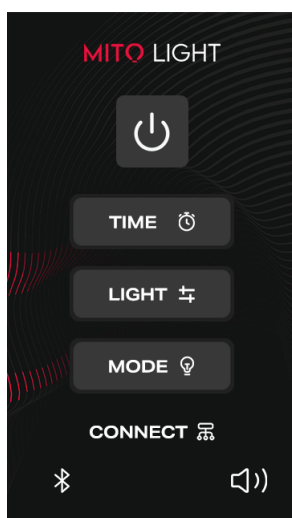


Wybierz tryb światła

- Naciśnij przycisk „**LIGHT**” i wybierz „**CLASSIC**” lub „**INDIVIDUAL**”.
 - „**CLASSIC**”: Jeden suwak reguluje jednocześnie wszystkie długości fal w zakresie CZERWONYM (630, 660, 670 nm), a drugi suwak reguluje jednocześnie wszystkie długości fal w zakresie NIR (810, 830, 850 nm).
 - „**INDIVIDUAL**”: Sześć oddzielnych suwaków pozwala ustawić każdą długość fali niezależnie.

Dostosuj intensywność i włącz światło

- Przesuń suwaki do pożądanego poziomu w zakresie od **0** do **100%**.
- Naciśnij symbol „✓”, aby włączyć światło.

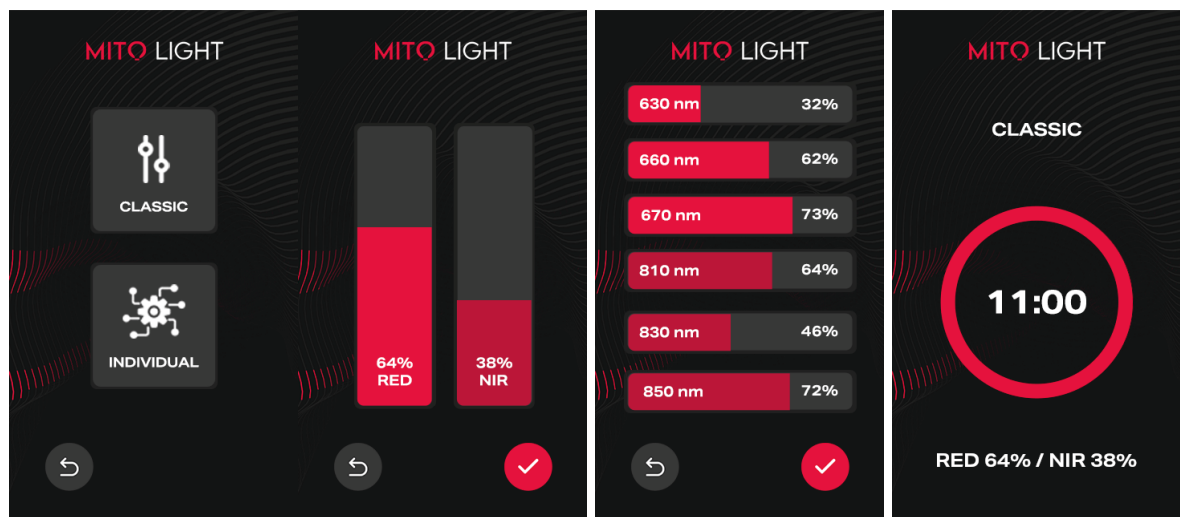

Tryb ustawień wstępnych

Wybierz tryb zaprogramowany

- Naciśnij przycisk „MODE” i wybierz żądany tryb.
- „**COMPLETE THERAPY**”: CZERWONE 100%, NIR 100%, 10 minut
- „**SKIN & BEAUTY**”: CZERWONE 100%, NIR 0%, 10 minut
- „**EVENING RECOVERY**”: CZERWONE 0%, NIR 100%, 10 minut
- „**AMBIENT LIGHT**”: CZERWONE 1%, NIR 0%, 20 minut
- Światło włącza się automatycznie po wybraniu trybu.



Wskazówki dotyczące użytkowania

- **Należy wystawiać się na działanie światła bez ubrania w odległości 15–50 cm** od urządzenia przez **10–20 minut** dziennie na każdy oświetlany obszar.
- **Zalecamy noszenie okularów ochronnych** podczas użytkowania. Jednak zgodnie z opiniami klientów większość z nich woli po prostu zamknąć oczy.

Dodatkowe elementy sterujące i funkcje

Podczas trwania sesji


- **Powrót do menu głównego:** dotknij poza okręgiem czasu.
- **Powrót do sesji:** dotknij czerwonej ikony zasilania w menu głównym.
- **Powrót do trybu:** dotknij bieżących ustawień światła pod okręgiem czasu.

Wyłączenie światła i wyłączenie urządzenia

- **Światło wyłączy się automatycznie** po upływie ustawionego czasu.
- Jeśli czas jest ustawiony na 0 MIN, światło pozostanie włączone, dopóki nie wyłączysz go ręcznie.
- **Aby ręcznie wyłączyć światło,** dotknij czasu w okręgu.
- Po zakończeniu korzystania z urządzenia **naciśnij przycisk zasilania** i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Spowoduje to całkowite odłączenie urządzenia od zasilania.

Łączenie wielu urządzeń

- Na każdym urządzeniu dotknij „CONNECT” i wybierz:
 - „PRIMARY” – urządzenie główne (steruje wszystkimi innymi urządzeniami „SECONDARY”)
 - „SECONDARY” – dostosowuje się do ustawień urządzenia „PRIMARY”
 - „SOLO” – działa niezależnie
- Wybierz ten sam numer „GROUP SIGNAL” (przyciski **1 / 2 / 3**) na wszystkich urządzeniach, które chcesz połączyć.

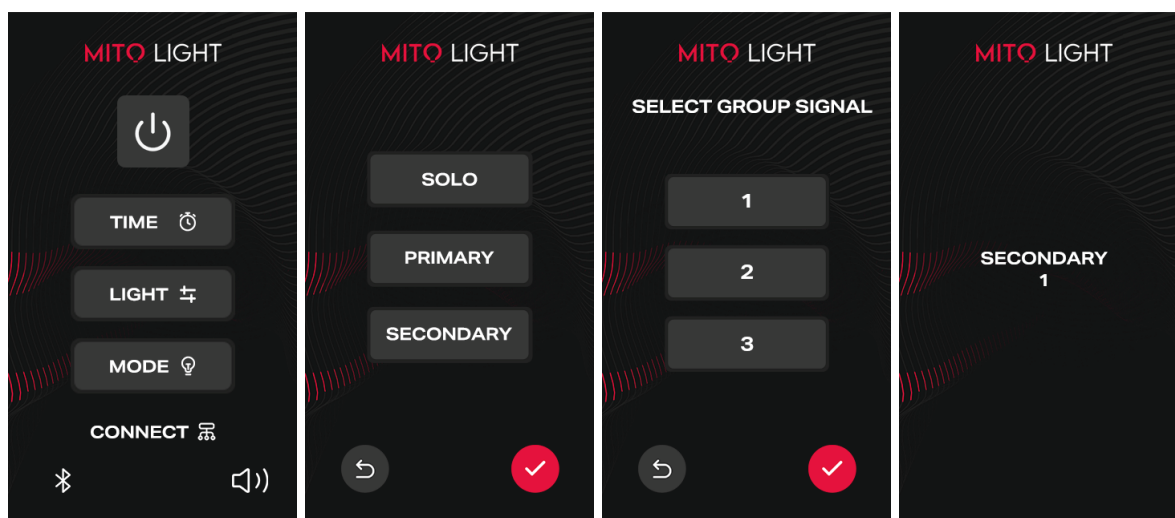

Bluetooth i sterowanie za pomocą aplikacji

- Dotknij ikony „BLUETOOTH” (w lewym dolnym rogu), aby włączyć lub wyłączyć Bluetooth.
- Zainstaluj aplikację **MITO LIGHT** ze sklepu **App Store** lub **Google Play**.
- **Włącz Bluetooth** na swoim urządzeniu, a następnie sparuj je w aplikacji **MITO LIGHT**.
- Po nawiązaniu połączenia możesz **sterować urządzeniem zdalnie** ze smartfona lub tabletu.

Tryb cichy

- Dotknij ikony „DŹWIĘK” (prawy dolny róg), aby włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe ekranu dotykowego.

Objaśnienie symboli

W instrukcji obsługi używane są następujące symbole:



Ostrzeżenie

Ostrzeżenie o ryzyku obrażeń lub zagrożeniu dla zdrowia.



Uwaga

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia lub akcesoriów.



Ochrona oczu

Należy nosić nieprzezroczyste okulary ochronne.



UTYLIZACJA

Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.

Instrukcje bezpieczeństwa

INSTALACJA



- Urządzenie należy postawić na twardej i równej powierzchni lub solidnie zawiesić.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku stacjonarnego (na ścianie / na stojaku / bezpiecznie oparte). Nie używać urządzenia w trybie ręcznym.
- Urządzenie nie jest stabilne, gdy stoi bez podparcia. Należy go używać wyłącznie opartego o ścianę lub inny stały punkt, aby zapobiec jego upadkowi.
- Podczas zawieszania urządzenia należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych w zestawie. Producent ponosi odpowiedzialność wyłącznie za bezpieczeństwo akcesoriów zawartych w zestawie, a nie za inne akcesoria ani miejsca, w których są one zawieszane.
- Jeśli korzystasz z urządzenia z podstawką z naszej oferty, zainstaluj ją zgodnie z instrukcją obsługi podstawki i zamocuj urządzenie do podstawki, aby zapobiec jego upadkowi.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenie nie może leżeć na przedniej stronie z diodami LED.
- Nie należy umieszczać w pobliżu urządzenia przedmiotów łatwopalnych lub topiących się.
- Nie używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu, w pobliżu wanny lub prysznica, w pobliżu mokrej umywalki ani z mokrymi rękami.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Nie używać urządzenia na świeżym powietrzu.
- Należy chronić urządzenie przed wstrząsami i wibracjami.
- Nieprawidłowy montaż może spowodować przewrócenie się lub upadek urządzenia, co może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia spowodowane użyciem niezatwierdzonych akcesoriów lub nieprawidłowym montażem.
- Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zamontowane. W razie wątpliwości dotyczących montażu należy skontaktować się ze sprzedawcą lub wymienioną obsługą klienta.
- Nie należy próbować zawieszać urządzenia w miejscach, które nie są wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymać jego ciężar.

- Należy regularnie sprawdzać instalację, aby upewnić się, że pozostaje ona bezpieczna przez cały czas. Jeśli jakakolwiek część instalacji wydaje się słabnąć lub ulegać zniszczeniu, należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia i skontaktować się ze sprzedawcą lub wymienioną obsługą klienta.
- Nie umieszczaj urządzenia w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie mogłoby zostać przypadkowo przewrócone.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi lub uszkodzeniu.

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA



- Przed użyciem urządzenia należy usunąć całe opakowanie.
- Należy sprawdzić urządzenie pod kątem śladów zużycia lub uszkodzeń. W razie podejrzenia uszkodzenia urządzenia nie należy go używać i należy skontaktować się ze sprzedawcą lub wymienioną obsługą klienta.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem.
- Chroń urządzenie przed kurzem, brudem i wilgocią.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE



- Każde niewłaściwe użycie może być niebezpieczne!
- Urządzenie można podłączać wyłącznie do napięcia sieciowego o wartości podanej na tabliczce znamionowej.
- Należy korzystać z łatwo dostępnego gniazdka sieciowego, aby w razie potrzeby móc szybko wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie dotykaj wtyczki sieciowej ani urządzenia mokrymi rękami. Istnieje ryzyko porażenia prądem!
- Chroń kabel zasilający przed kontaktem z gorącymi przedmiotami i otwartym ogniem.
- Ułóż kabel zasilający tak, aby nikt o niego nie potknął się.
- Uważaj, aby nie przygnieść kabla zasilającego.

- Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane, podczas czyszczenia lub w przypadku awarii, pojawienia się dymu lub nieprzyjemnego zapachu. Wyciągając wtyczkę, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód!
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy przełącznik zasilania jest włączony, a urządzenie podłączone do gniazdka.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że urządzenie i jego akcesoria nie są widocznie uszkodzone. W razie wątpliwości nie używaj urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą lub wymienioną obsługą klienta.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub obudowy należy skontaktować się ze sprzedawcą lub wymienionym działem obsługi klienta. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka zasilająca są uszkodzone.
- Regularnie sprawdzaj instalację, aby upewnić się, że pozostaje ona bezpieczna przez długi czas. Jeśli jakkolwiek część instalacji wydaje się słabnąć lub ulegać zniszczeniu, natychmiast zaprzestań użytkowania urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą lub wymienioną obsługą klienta.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie mogłoby zostać przypadkowo przewrócone.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi lub uszkodzeniu.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone. Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Urządzenie jest bezpiecznie odłączone od sieci zasilającej tylko wtedy, gdy wtyczka sieciowa jest wyjęta z gniazdka.

UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM



- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do oświetlenia.
- Wszelkie inne zastosowania uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby o braku doświadczenia lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
- Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ryzyko uduszenia – małe elementy.

- Urządzenia nie wolno przykrywać ani owijać opakowaniem, gdy jest włączone.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
- Jeśli urządzenie upadło na podłogę, zostało narażone na działanie nadmiernej wilgoci lub uległo innym uszkodzeniom, nie wolno go używać.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani w innym płynie, a do jego wnętrza nie może dostać się żaden płyn.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy oraz gdy włączona jest funkcja alarmu świetlnego.
- Należy natychmiast wyłączyć urządzenie, jeśli jest uszkodzone lub jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Nie używać urządzenia w obecności łatwopalnych mieszanek gazów narkotycznych z powietrzem, tlenem lub tlenkiem azotu.
- Nie należy dokonywać żadnych zmian w urządzeniu bez zgody producenta. Istnieje ryzyko obrażeń, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia urządzenia.
- Urządzenie to jest przeznaczone przede wszystkim do użytku domowego.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA



- Nie patrz na źródło światła podczas świecenia i noś okulary ochronne.
- Podczas pracy i krótko po użyciu metalowa obudowa może się nagrzewać. Nie dotykać obudowy podczas pracy.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami, gdy jest włączone.
- Na urządzenie nie może dostać się woda.
- Urządzenie należy używać wyłącznie w stanie całkowicie suchym.
- Przed użyciem urządzenia należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
- Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie za pomocą przełącznika zasilania i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy wyłącznik zasilania jest włączony, a urządzenie podłączone do gniazdka.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli upadło lub wpadło do wody albo jeśli zostało uszkodzone.
- Usuń łatwopalne przedmioty z zasięgu urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny lub prysznica, nad mokrą umywalką ani mokrymi rękami.

KIEDY NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA?



- W przypadku ostrych stanów zapalnych urządzenie można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Kobiety w ciąży mogą korzystać z urządzenia wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- W przypadku pacjentów z nowotworami urządzenie można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Osoby z nadczynnością tarczycy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Jeśli osoba przyjmuje jakiegokolwiek leki, które mogą wpływać na wrażliwość na światło, urządzenie można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- W przypadku dzieci urządzenie można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem i pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy stosować u osób niezdolnych do samodzielnej obsługi, dzieci poniżej 3 roku życia ani osób niewrażliwych na ciepło (osób z chorobami skóry), po zażyciu środków przeciwbólowych, alkoholu lub narkotyków.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia skonsultuj się z lekarzem!
- Stosowanie po urazach lub operacjach jest dozwolone wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Urządzenie nie jest odpowiednie dla osób o obniżonej wrażliwości na ciepło.
- Nie należy stosować preparatu na opuchnięte, poparzone lub stan zapalny części ciała, obszary pokryte wysypką, rany ani inne wrażliwe miejsca.
- Nie używaj produktu, jeśli skóra jest poparzona lub nieczuła.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza.

WAŻNE INFORMACJE



- Odległość od urządzenia zależy od indywidualnej wrażliwości na światło oraz konkretnych potrzeb. Należy zawsze upewnić się, że nie przekroczona została minimalna odległość 15 cm między urządzeniem a częścią ciała, która ma być naświetlana.

- Nie naświetlaj jednego obszaru dłużej niż 30 minut dziennie.
- Nie naświetlaj jednego obszaru dłużej niż 20 minut jednorazowo.
- Zawsze należy sprawdzać, czy nie występują reakcje skórne lub oczu. Jeśli światło powoduje oparzenia skóry lub oczu, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i nie używać go.
- Leki, kosmetyki lub pokarmy mogą w pewnych okolicznościach powodować nadwrażliwość lub alergiczne reakcje skórne. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć oświetlenie.
- Podczas obsługi urządzenia należy zachować szczególną ostrożność i uwagę.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś zmęczony i istnieje ryzyko zasypiania przy włączonym świetle.
- Zbyt długa ekspozycja na światło może prowadzić do stresu komórkowego i jest potencjalnie niebezpieczna.
- Dzieci nie są świadome zagrożeń związanych z urządzeniami elektrycznymi. Należy upewnić się, że urządzenie nie jest używane przez dzieci pozostające bez nadzoru.

CZYSZCZENIE I NAPRAWA



- W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani w inny sposób naprawiać urządzenia. W przeciwnym razie nie można zagwarantować jego bezawaryjnego działania. Nieprzestrzeganie tej zasady spowoduje utratę gwarancji.
- W celu naprawy należy skontaktować się ze sprzedawcą lub wymienioną obsługą klienta.
- Niewłaściwa obsługa może spowodować obrażenia ciała, porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Nie zawiera ono żadnych części, które można naprawić samodzielnie.
- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i poczekać, aż ostygnie.
- Nie myć urządzenia w zmywarce!
- Nie używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.
- Podczas czyszczenia odłącz kabel zasilający i delikatnie przetrzyj urządzenie ściereczką.
- Nie należy rozpylać wody ani innych płynów bezpośrednio na urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT



- Nie należy przenosić ani przechowywać urządzenia, gdy jest włączone lub nadal gorące. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności należy je wyłączyć, odłączyć od zasilania i poczekać, aż ostygnie.
- Urządzenie należy przechowywać najlepiej w oryginalnym opakowaniu i w suchym miejscu.
- Przed przechowywaniem należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w miejscach, gdzie będzie narażone na działanie toksycznych oparów lub substancji lotnych.
- Podczas transportu upewnij się, że produkt jest wyłączony, odłączony od zasilania, a wszystkie kable zostały odłączone.
- Należy zapobiegać uderzaniu przedmiotów o urządzenie oraz ich spadaniu na nie.

W SYTUACJI AWARYJNEJ



- W przypadku pożaru urządzenia nie próbuj gasić go wodą. Użyj gaśnicy odpowiedniej do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych.
- Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, iskry lub silny zapach spalenizny, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą lub wymienioną obsługą klienta.
- W takich przypadkach nie należy próbować samodzielnie naprawiać ani demontować urządzenia. Może to doprowadzić do dalszych uszkodzeń lub obrażeń.
- Jeśli urządzenie spowoduje porażenie prądem, należy natychmiast odłączyć je od sieci zasilającej. Nie wolno dotykać bezpośrednio osoby, która ma kontakt z źródłem prądu. Należy użyć przedmiotu nieprzewodzącego prądu, aby oddzielić tę osobę od źródła prądu, a następnie natychmiast wezwać pomoc medyczną.

UWAGA

- Nie są znane żadne skutki uboczne dla zastosowań wymienionych w niniejszej instrukcji, pod warunkiem przestrzegania wszystkich wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
- W przypadku wszelkich innych zastosowań niewymienionych w niniejszej instrukcji obsługi urządzenie można używać wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego ani klinicznego.
- W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych skonsultuj się z lekarzem!

Skąd mam wiedzieć, czy lampka działa prawidłowo?

- Po włączeniu spektrum czerwonego (RED) diody LED zapalają się, emitując widzialne, intensywne czerwone światło. W tym samym czasie włączają się wentylatory.
- Po włączeniu widma bliskiej podczerwieni (NIR) diody LED zapalają się, emitując niewidzialne światło bliskiej podczerwieni. Widmo to jest niewidoczne dla ludzkiego oka. Prawidłowe działanie można sprawdzić za pomocą aparatu w telefonie komórkowym. Obiektyw aparatu jest w stanie wykryć to światło. Jednocześnie włączają się wentylatory.
- Gdy włączone są zarówno widmo czerwone (RED), jak i bliskiej podczerwieni (NIR), wszystkie diody LED świecą się jednocześnie. W tym samym czasie włączają się wentylatory.

Jak sprawdzić, czy światło działa prawidłowo?

- Diody LED czerwone (RED) lub bliskiej podczerwieni (NIR) nie świecą się ani nie migają po włączeniu.
- Po włączeniu światła czerwonego lub bliskiej podczerwieni świeci się tylko część diod LED czerwonych (RED) lub bliskiej podczerwieni (NIR).
- Po włączeniu światła czerwonego lub bliskiej podczerwieni słychać nietypowy dźwięk wentylatora.

Dane techniczne

Nazwa i model	MITO LIGHT® Starter 5.0 / Expert 5.0 / Biohacker 5.0 / Mitohacker 5.0 / Master 5.0
Pobór mocy	Starter 5.0 – 213 W / Expert 5.0 – 443 W / Biohacker 5.0 – 589 W / Mitohacker 5.0 – 1080 W / Master 5.0 – 1852 W
Zużycie	Starter 5.0 – 0,213 kWh / Expert 5.0 – 0,443 kWh / Biohacker 5.0 – 0,589 kWh / Mitohacker 5.0 – 1,080 kWh / Master 5.0 – 1,852 kWh
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	Starter 5.0 – 42,5 x 30,5 x 6,5 cm / Expert 5.0 – 74,5 x 30,5 x 6,5 cm / Biohacker 5.0 – 101,5 x 30,5 x 6,5 cm / Mitohacker 5.0 – 101,5 x 49,5 x 6,5 cm / Master 5.0 – 183 x 53 x 9,7 cm
Waga	Starter 5.0 – 6,85 kg / Expert 5.0 – 8,1 kg / Biohacker 5.0 – 10,6 kg / Mitohacker 5.0 – 16,7 kg / Master 5.0 – 33 kg
Pobór mocy	100–277 V AC, 50/60 Hz
Długości fal	630, 660, 670, 810, 830, 850 nm
Bluetooth Low Energy	Częstotliwość 2400–2483,5 MHz, moc < -4 dBm
Urządzenie krótkiego zasięgu	Częstotliwość 2478 MHz, szerokość pasma 1 MHz, typ modulacji GFSK, moc < -11 dBm
Warunki pracy	temperatura od 10°C do 30°C, wilgotność od 40% do 60% (bez kondensacji), ciśnienie atmosferyczne od 980 hPa do 1050 hPa, wysokość od 0 do 2000 m n.p.m.
Warunki przechowywania	temperatura od 0°C do 40°C, wilgotność od 40% do 60% (bez kondensacji)
Żywotność diod LED	50 000 godzin świecenia
Stopień ochrony IP	IP20
Materiały	Metal, tworzywo sztuczne
Kąt rozsyłu obiektywu	30 stopni
Certyfikaty	CE, UKCA, RoHS

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych mających na celu ulepszenie i dalszy rozwój urządzenia oraz do poprawek w przypadku błędów drukarskich.

Utylizacja

W celu ochrony środowiska urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Utylizacja musi odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ekologiczny sposób utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego zapewnia system zbiórki firmy REMA System, a.s. Jeśli chcesz pozbyć się swojego urządzenia, skontaktuj się z nami pod adresem hello@mitolight.com, a my zorganizujemy bezpłatny odbiór urządzenia z Twojego adresu na całym świecie oraz przetransportujemy je do punktu zbiórki firmy REMA System, a.s.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma MITO LIGHT Logistics s.r.o. oświadcza, że urządzenia radiowe MITO LIGHT[®], modele Starter 5.0, Expert 5.0, Biohacker 5.0, Mitohacker 5.0, Master 5.0, są zgodne z następującymi dyrektywami:

2014/53/UE (RED), 2011/65/UE (RoHS)

Pełny tekst unijnej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.mitolight.com/declaration-of-conformity



Gwarancja i reklamacje

MITO LIGHT® Starter 5.0

MITO LIGHT® Expert 5.0

MITO LIGHT® Biohacker 5.0

MITO LIGHT® Mitohacker 5.0

MITO LIGHT® Master 5.0

są objęte 3-letnią gwarancją.

Jeśli urządzenie, które otrzymałeś, nie działa lub wystąpił jakikolwiek problem podczas użytkowania, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie:

www.mitolight.com/complaints-and-returns

Rozpatrzymy Twoją reklamację w rekordowym czasie!

Warunki reklamacji można znaleźć pod adresem:

www.mitolight.com/complaint-conditions

Obsługa klienta

OBSŁUGA KLIENTA

hello@mitolight.com

+44 330 777 2233

MITO LIGHT Logistics s.r.o.

Nr rejestru handlowego: 19262680

Ke Karlovu 1351/13

301 00 Pilzno

Czechy