

Poznaj swój nowy MITO LIGHT®

INTRO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy!

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybranie MITO LIGHT®.

Założyliśmy tę firmę, kierując się wspólną pasją i wspierani przez świetny zespół, a naszą wizją jest wprowadzenie mocy światła czerwonego i bliskiej podczerwieni do codziennego życia.

Produkty MITO LIGHT® zostały starannie zaprojektowane i opracowane, aby były najlepsze na rynku, a ich działanie wspiera wyjątkowa obsługa klienta.

Przed użyciem urządzenia MITO LIGHT® prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, zachowanie jej na przyszłość, przekazanie innym użytkownikom oraz przestrzeganie zawartych w niej wskazówek.

Zespół MITO LIGHT®

Informacje

Urządzenie MITO LIGHT® posiada certyfikaty CE, UKCA i RoHS. Wszystkie podane informacje mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie mają na celu wykazania bezpieczeństwa ani skuteczności urządzenia MITO LIGHT® w diagnostyce, leczeniu lub zapobieganiu jakimkolwiek chorobom. Urządzenie MITO LIGHT® oraz wszystkie podane informacje nie zastępują osobistej konsultacji z lekarzem, nie służą do diagnozowania problemów zdrowotnych i nie powinny być traktowane jako porada medyczna. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli cierpisz na jakiegokolwiek schorzenia lub przyjmujesz leki. Urządzenie MITO LIGHT® jest przeznaczone wyłącznie do oświetlania. Indywidualne wyniki mogą się różnić.

Spis treści

- 01** Zawartość opakowania
- 02** Opis
- 03** Jak to działa?
- 04** Akcesoria
- 05** Jak korzystać z urządzenia
- 06** Objasnienie symboli
- 07** Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
- 08** Dane techniczne
- 09** Utylizacja
- 10** Deklaracja zgodności
- 11** Gwarancja i reklamacje

Zawartość opakowania

- 1x lampka LED
- 1x kabel zasilający
- 1x okulary ochronne
- 1x system do zawieszania
- 1x instrukcja obsługi

Najpierw sprawdź, czy zawartość opakowania jest kompletna i nieuszkodzona. W razie wątpliwości nie używaj urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Opakowanie nadaje się do recyklingu lub można je oddać do recyklingu surowców. Prosimy o utylizację niepotrzebnych materiałów opakowaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli podczas rozpakowywania zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe podczas transportu, skontaktuj się niezwłocznie ze sprzedawcą.

Opis

MITO LIGHT® Intro


(zwane dalej „urządzeniem”)

Specyfikacje urządzenia, rozmieszczenie poszczególnych elementów w różnych modelach lub treść niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu ulepszenia funkcji produktu.

Urządzenie MITO LIGHT® emituje **światło czerwone i bliskie podczerwieni**. Jest wyposażone w **dwuchipowe diody LED dużej mocy** o optymalnym doborze długości fal, które charakteryzują się sześcioma pikami: **630, 660, 670, 810, 830 i 850 nm**. Wszystkie piki długości fal występują w takich samych proporcjach. Każda dioda LED zawiera jeden chip czerwony i jeden chip bliskiej podczerwieni. Ta kombinacja zapewnia **doskonałą synergę** w postaci światła czerwonego i bliskiej podczerwieni.

Części urządzenia

- | | |
|--|---|
| 1 Diody LED | 6 Otwory do zawieszenia w pionie |
| 2 Panel sterowania | 7 Włącznik zasilania |
| 3 Podstawa | 8 Otwory do montażu VESA |
| 4 Otwory wentylacyjne | 9 Złącze kabla zasilającego |
| 5 Podkładki ochronne na spodzie | 10 Wentylatory chłodzące |

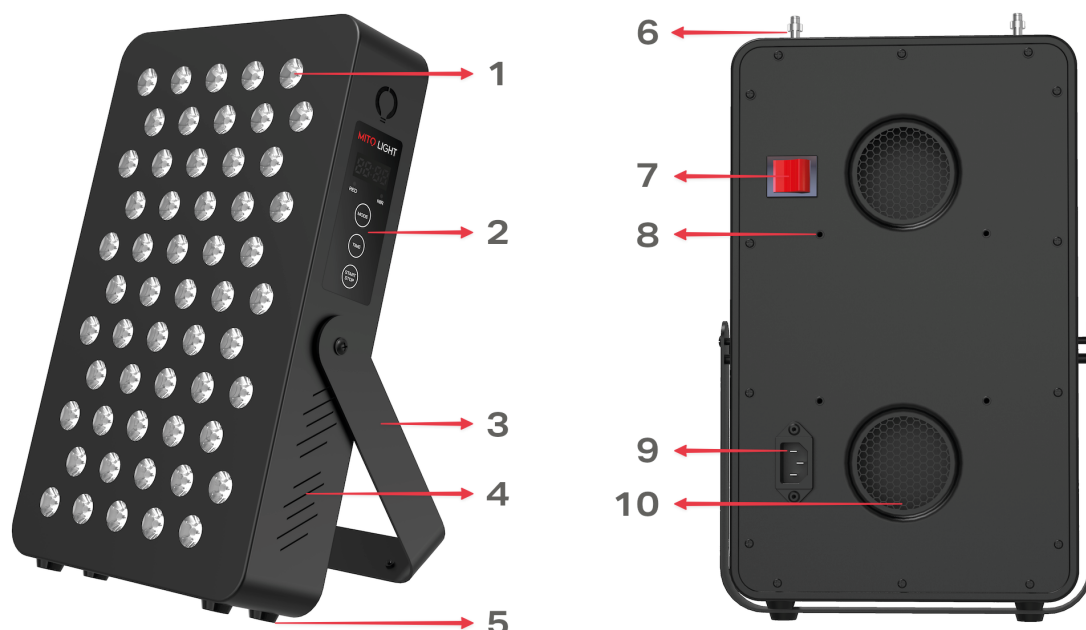

Jak to działa?


Światło czerwone i bliskiej podczerwieni jest pochłaniane przez maleńkie cząsteczki wrażliwe na światło znajdujące się wewnątrz mitochondriów, które są centrami energetycznymi komórki.

Badania naukowe wskazują, że ta interakcja może **pomóc mitochondriom** pracować wydajniej.

Dzięki temu fale o tych długościach mogą pomóc w osiągnięciu takich celów, jak **utrzymanie codziennej vitalności, uzyskanie gładkiej i jednolitej skóry, szybka regeneracja po wysiłku fizycznym oraz ogólne dobre samopoczucie przy wysokim poziomie energii.**

Jakie są różnice między światłem czerwonym a bliską podczerwienią?

- **Widzialne światło czerwone (RED)** jest wchłaniane głównie przez górne warstwy **skóry**, dlatego zazwyczaj stosuje się je do pielęgnacji powierzchniowej.
- **Niewidzialne światło bliskiej podczerwieni (NIR)** dociera do **głębszych tkanek** i jest często preferowane przez osoby poszukujące relaksu po wysiłku fizycznym lub jasnego, czujnego umysłu.
- Stosowane razem **światło czerwone i bliskiej podczerwieni wzajemnie się uzupełniają**, obejmując zarówno powierzchnię, jak i głębsze warstwy.

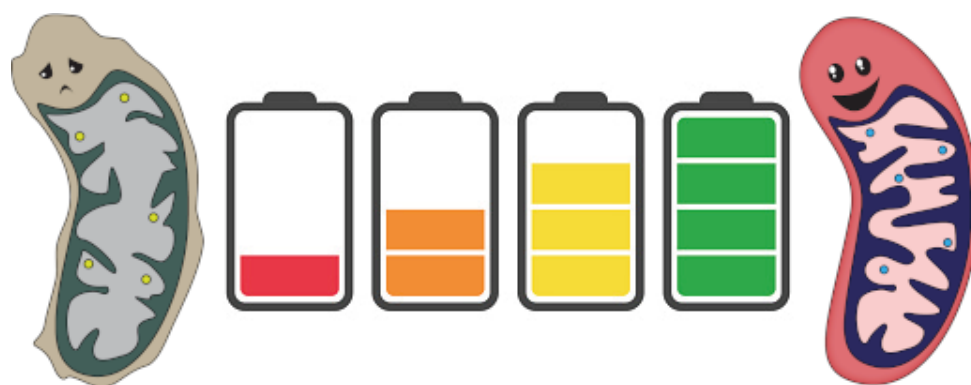

Akcesoria

Kabel zasilający

- Służy do podłączenia urządzenia do gniazdka elektrycznego.

Okulary ochronne

- Zalecamy noszenie okularów ochronnych podczas użytkowania. Jednak z opinii klientów wynika, że większość z nich woli po prostu zamknąć oczy.

System zawieszenia

- Śruba oczkowa, kołek
 - Przeznaczony jest do montażu w ścianie jako stały punkt do zawieszenia urządzenia.
 - Wywiercić otwór w ścianie o wystarczającej nośności, włożyć kołek i wkręcić śrubę oczkową.
- Regulowany hak do drzwi
 - Przeznaczony jest do montażu na drzwiach jako punkt mocowania urządzenia.
 - Przymocować hak do drzwi od góry na otwartych drzwiach i dokręcić go za pomocą gwintu, aby go zamocować.
- Liny stalowe z gwintem i karabinkiem, śruby dwustronne
 - Służą do połączenia urządzenia z bloczkiem za pomocą liny do zawieszenia urządzenia.
 - Wkręć śruby dwustronne w gwinty znajdujące się na górze urządzenia, a następnie nakręć na nie gwinty lin stalowych.
- Bloczek z liną i karabinkami
 - Zaczep karabińczyk bloczka o haczyk w drzwiach lub śrubę oczkową. Następnie połącz drugi karabińczyk z tym na stalowych linkach.
 - Wyreguluj karabinek, aby ustawić żadaną wysokość zawieszonego urządzenia.

Jak korzystać z urządzenia

Bezpieczeństwo i konfiguracja

1. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa (rozdział 7).
2. Rozpakuj urządzenie i umieść je na stabilnej, równej powierzchni, tak aby nie mogło się przewrócić.
3. Podłącz kabel zasilający do urządzenia.
4. Podłącz kabel zasilający do uziemionego gniazdka elektrycznego.
5. Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć urządzenie.

Szybki start

- Naciśnij przycisk START/STOP, aby natychmiast rozpocząć sesję świetlną.
- Urządzenie włączy tryby RED i NIR na 10 minut.

Ustawianie sesji

Krok 1: Wybierz tryb światła

Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać się między dostępnymi trybami światła:

- Wyświetlany symbol „R” = wyłącznie widmo światła czerwonego
- Wyświetlany symbol „I” = Tylko widmo bliskiej podczerwieni
- Wyświetlany symbol „R I” = Połączone spektrum czerwone i bliskiej podczerwieni

Krok 2: Ustaw czas zabiegu

Naciśnij kilkakrotnie przycisk TIME, aby ustawić czas trwania sesji (1–20 minut).

- Uwaga: Ustawienie timera na 00:00 włącza tryb ciągły. Światło pozostaje włączone do momentu ręcznego wyłączenia.

Krok 3: Rozpocznij sesję

Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć sesję świetlną.

Krok 4: Wstrzymanie lub wznowienie

Naciśnij przycisk START/STOP podczas działania, aby wstrzymać sesję. Naciśnij ponownie, aby wznowić.

Krok 5: Regulacja podczas sesji

Podczas trwania sesji możesz:

- Naciśnij przycisk TIME, aby zmienić pozostały czas sesji.
- Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać się między trybami oświetlenia.

Krok 6: Zakończ sesję

Światło wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu. Aby wyłączyć je ręcznie, naciśnij przycisk START/STOP.

Tryb cichy

- Przytrzymaj przycisk START/STOP przez 3–5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe przycisków.

Wyłączanie

6. Wyłącz przełącznik zasilania na urządzeniu.
7. Odłącz przewód zasilający z gniazdka.

Zapewnia to całkowite odłączenie urządzenia od zasilania.

Wskazówki dotyczące użytkowania

- Należy wystawiać się na działanie światła bez ubrania, w odległości 15–50 cm od urządzenia, przez 10–20 minut dziennie na każdy obszar poddawany naświetlaniu.
- Zalecamy noszenie okularów ochronnych podczas użytkowania. Jednak zgodnie z opiniami klientów większość z nich woli po prostu zamknąć oczy.

Objaśnienie symboli

W instrukcji obsługi użyto następujących symboli:



Ostrzeżenie

Ostrzeżenie o ryzyku obrażeń lub zagrożeniu dla zdrowia.



Uwaga

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa w związku z możliwym uszkodzeniem urządzenia/akcesoriów.



Ochrona oczu

Należy nosić nieprzezroczyste okulary ochronne.



UTYLIZACJA

Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

INSTALACJA



- Urządzenie należy postawić na twardej i równej powierzchni lub solidnie zawiesić.
- Urządzenie nie jest stabilne, gdy stoi bez podpory. Należy używać go wyłącznie z wbudowaną podstawką, aby zapewnić jego stabilność i zapobiec upadkowi.
- Podczas zawieszania urządzenia należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych w zestawie. Producent ponosi odpowiedzialność wyłącznie za bezpieczeństwo akcesoriów zawartych w zestawie, a nie za inne akcesoria ani miejsca, w których są one zawieszane.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenie nie może leżeć na przedniej stronie z diodami LED.
- Nie należy umieszczać w pobliżu urządzenia przedmiotów łatwopalnych lub topiących się.
- Nie należy używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu, w pobliżu wanny lub prysznica, w pobliżu mokrej umywalki ani z mokrymi rękami.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Nie używaj urządzenia na świeżym powietrzu.
- Należy chronić urządzenie przed wstrząsami i wibracjami.
- Nieprawidłowa instalacja może spowodować przewrócenie się lub upadek urządzenia, co może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia spowodowane użyciem niezatwierdzonych akcesoriów lub nieprawidłową instalacją.
- Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zamontowane. W razie wątpliwości dotyczących montażu należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z działem obsługi klienta podanym w wykazie.
- Nie próbuj zawieszać urządzenia w miejscach, które nie są wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymać jego ciężar.
- Regularnie sprawdzaj instalację, aby upewnić się, że pozostaje ona bezpieczna przez długi czas. Jeśli jakkolwiek część instalacji wydaje się słabnąć lub ulegać zniszczeniu,

natychmiast zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą lub wymienioną obsługą klienta.

- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie mogłoby zostać przypadkowo przewrócone.
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi lub uszkodzeniu.

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA



- Przed użyciem urządzenia należy usunąć całe opakowanie.
- Sprawdź urządzenie pod kątem śladów zużycia lub uszkodzeń. Jeśli masz wątpliwości co do stanu urządzenia, nie używaj go i skontaktuj się ze sprzedawcą lub wymienioną obsługą klienta.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem.
- Należy chronić urządzenie przed kurzem, brudem i wilgocią.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE



- Każde niewłaściwe użycie może być niebezpieczne!
- Urządzenie można podłączać wyłącznie do napięcia sieciowego o wartości podanej na tabliczce znamionowej.
- Należy używać łatwo dostępnego gniazdka, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę.
- Nie należy dotykać wtyczki sieciowej ani urządzenia mokrymi rękami. Istnieje ryzyko porażenia prądem!
- Należy chronić przewód zasilający przed kontaktem z gorącymi przedmiotami i otwartym ogniem.
- Ułóż kabel zasilający tak, aby nikt się o niego nie potknął.
- Uważaj, aby nie przygnieść kabla zasilającego.
- Odłącz wtyczkę z gniazdka, gdy nie korzystasz z urządzenia, podczas czyszczenia lub w przypadku usterki, dymu lub zapachu. Wyciągając wtyczkę, pociągnij za wtyczkę, a nie za kabel!

- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy przełącznik zasilania jest włączony, a urządzenie podłączone do gniazdka.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie i jego akcesoria nie mają widocznych uszkodzeń. W razie wątpliwości nie należy używać urządzenia i skontaktować się ze sprzedawcą lub wymienioną obsługą klienta.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub obudowy skontaktuj się ze sprzedawcą lub wymienioną obsługą klienta. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka zasilająca są uszkodzone.
- Należy regularnie sprawdzać instalację, aby upewnić się, że pozostaje ona bezpieczna przez cały czas. Jeśli jakkolwiek część instalacji wydaje się być osłabiona lub zniszczona, należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia i skontaktować się ze sprzedawcą lub wymienioną obsługą klienta.
- Nie umieszczaj urządzenia w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie mogłoby zostać przypadkowo przewrócone.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi lub uszkodzeniu.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone. Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Urządzenie jest bezpiecznie odłączone od sieci zasilającej dopiero po wyjęciu wtyczki z gniazdka.

UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM



- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do oświetlenia.
- Wszelkie inne zastosowania należy uznać za niezgodne z przeznaczeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby o braku doświadczenia lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
- Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ryzyko uduszenia – małe elementy.
- Urządzenia nie wolno przykrywać ani owijać opakowaniem, gdy jest włączone.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
- Jeśli urządzenie upadło na podłogę, zostało narażone na nadmierną wilgoć lub uległo uszkodzeniu w inny sposób, nie wolno go używać.

- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani innym płynie, a do jego wnętrza nie może dostać się żaden płyn.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy oraz gdy włączona jest funkcja alarmu świetlnego.
- W przypadku usterki urządzenia lub uszkodzenia przewodu zasilającego należy je natychmiast wyłączyć.
- Nie używać urządzenia w obecności łatwopalnych mieszanek gazów narkotycznych z powietrzem, tlenem lub tlenkiem azotu.
- Nie należy wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu bez zgody producenta. Istnieje ryzyko obrażeń, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia urządzenia.
- Urządzenie to jest przeznaczone przede wszystkim do użytku domowego.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA



- Nie patrz na źródło światła podczas świecenia i noś okulary ochronne.
- Nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękami, gdy jest włączone.
- Na urządzenie nie może dostać się woda.
- Urządzenie należy używać wyłącznie w stanie całkowicie suchym.
- Przed użyciem urządzenia należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
- Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie za pomocą przełącznika zasilania i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy przełącznik zasilania jest włączony, a urządzenie podłączone do gniazdka.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli upadło lub wpadło do wody albo jeśli zostało uszkodzone.
- Usuń łatwopalne przedmioty z zasięgu urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny lub prysznicza, nad mokrą umywalką ani z mokrymi rękami.

KIEDY NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA?



- W przypadku ostrych stanów zapalnych urządzenie można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Kobiety w ciąży mogą korzystać z urządzenia wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- W przypadku pacjentów z nowotworami urządzenie można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Osoby z nadczynnością tarczycy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Jeśli osoba przyjmuje jakiegokolwiek leki, które mogą wpływać na wrażliwość na światło, urządzenie można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- W przypadku dzieci urządzenie można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem i pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy stosować u osób niezdolnych do samodzielnej obsługi, dzieci poniżej 3 roku życia ani osób niewrażliwych na ciepło (osób z chorobami skóry), po zażyciu środków przeciwbólowych, alkoholu lub narkotyków.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia skonsultuj się z lekarzem!
- Stosowanie po urazie lub operacji jest dozwolone wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Urządzenie nie jest odpowiednie dla osób o obniżonej wrażliwości na ciepło.
- Nie należy stosować preparatu na opuchnięte, poparzone lub stan zapalny części ciała, obszary pokryte wysypką, rany ani inne wrażliwe miejsca.
- Nie używaj produktu, jeśli skóra jest poparzona lub znieczulona.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza.

WAŻNE INFORMACJE



- Odległość od urządzenia zależy od indywidualnej wrażliwości na światło oraz konkretnych potrzeb. Należy zawsze upewnić się, że nie przekroczono minimalnej odległości 15 cm między urządzeniem a częścią ciała, która ma być naświetlana.
- Nie naświetlaj jednego obszaru dłużej niż 30 minut dziennie.
- Nie naświetlaj jednego obszaru dłużej niż 20 minut jednorazowo.

- Zawsze należy sprawdzać, czy nie występują reakcje skórne lub oczu. Jeśli światło powoduje oparzenia skóry lub oczu, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i nie używać go.
- Leki, kosmetyki lub pokarmy mogą w pewnych okolicznościach powodować nadwrażliwość lub alergiczne reakcje skórne. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć oświetlenie.
- Podczas obsługi urządzenia należy zachować szczególną ostrożność i uwagę.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś zmęczony i istnieje ryzyko zasypiania przy włączonym świetle.
- Zbyt długa ekspozycja na światło może prowadzić do stresu komórkowego i jest potencjalnie niebezpieczna.
- Dzieci nie są świadome zagrożeń związanych z urządzeniami elektrycznymi. Należy upewnić się, że urządzenie nie jest używane przez dzieci pozostające bez nadzoru.

CZYSZCZENIE I NAPRAWA



- W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani w inny sposób naprawiać urządzenia. W przeciwnym razie nie można zagwarantować jego bezawaryjnego działania. Nieprzestrzeganie tej zasady spowoduje utratę gwarancji.
- W celu naprawy należy skontaktować się ze sprzedawcą lub wymienionym działem obsługi klienta.
- Niewłaściwa obsługa może spowodować obrażenia ciała, porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Nie zawiera ono żadnych części, które można naprawić samodzielnie.
- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i poczekać, aż ostygnie.
- Nie myć urządzenia w zmywarce!
- Nie używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.
- Podczas czyszczenia odłącz kabel zasilający i delikatnie przetrzyj urządzenie ściereczką.
- Nie należy rozpylać wody ani innych płynów bezpośrednio na urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT



- Przed przeniesieniem urządzenia należy je wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed dotknięciem urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.
- Urządzenie najlepiej przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.
- Przed odłożeniem urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.
- Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w miejscach, gdzie będzie narażone na działanie toksycznych oparów lub substancji lotnych.
- Podczas transportu upewnij się, że produkt jest wyłączony, odłączony od zasilania, a wszystkie kable zostały odłączone.
- Należy zapobiegać uderzeniom i upadkom przedmiotów na urządzenie.

W SYTUACJI AWARYJNEJ



- W razie zapalenia się urządzenia nie należy próbować gasić go wodą. Należy użyć gaśnicy przeznaczonej do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych.
- Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, iskry lub silny zapach spalenizny, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą lub wymienioną obsługą klienta.
- W takich przypadkach nie należy próbować samodzielnie naprawiać ani demontować urządzenia. Może to doprowadzić do dalszych uszkodzeń lub obrażeń.
- Jeśli urządzenie spowoduje porażenie prądem, należy natychmiast odłączyć je od sieci zasilającej. Nie wolno dotykać bezpośrednio osoby, która ma kontakt z źródłem prądu. Należy użyć przedmiotu nieprzewodzącego prądu, aby oddzielić tę osobę od źródła prądu, a następnie natychmiast wezwać pomoc medyczną.

UWAGA

- Nie są znane żadne skutki uboczne dla zastosowań wymienionych w niniejszej instrukcji, pod warunkiem przestrzegania wszystkich wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
- W przypadku wszelkich innych zastosowań niewymienionych w niniejszej instrukcji obsługi urządzenie można używać wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego ani klinicznego.
- W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych skonsultuj się z lekarzem!

Skąd mam wiedzieć, czy lampka działa prawidłowo?

- Po włączeniu spektrum czerwonego (RED) diody LED zapalają się, emitując widzialne, intensywne czerwone światło. W tym samym czasie włączają się wentylatory.
- Po włączeniu widma bliskiej podczerwieni (NIR) diody LED zapalają się, emitując niewidzialne światło bliskiej podczerwieni. Widmo to jest niewidoczne dla ludzkiego oka. Prawidłowe działanie można sprawdzić za pomocą aparatu w telefonie komórkowym. Obiektyw aparatu jest w stanie wykryć to światło. Jednocześnie włączają się wentylatory.
- Gdy włączone są zarówno widmo czerwone (RED), jak i bliskiej podczerwieni (NIR), wszystkie diody LED świecą się jednocześnie. W tym samym czasie włączają się wentylatory.

Jak sprawdzić, czy światło działa prawidłowo?

- Diody LED czerwone (RED) lub bliskiej podczerwieni (NIR) nie świecą się ani nie migają po włączeniu.
- Po włączeniu światła czerwonego lub bliskiej podczerwieni świeci się tylko część diod LED czerwonych (RED) lub bliskiej podczerwieni (NIR).
- Po włączeniu światła czerwonego lub bliskiej podczerwieni słychać nietypowy dźwięk wentylatora.

Dane techniczne

Nazwa i model	MITO LIGHT® Intro
Pobór mocy	105 W
Zużycie	0,105 kWh
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	34 x 21 x 6,5 cm
Waga	3,2 kg
Pobór mocy	100–277 V AC, 50/60 Hz
Długości fal	630, 660, 670, 810, 830, 850 nm
Warunki pracy	temperatura od 10°C do 30°C, wilgotność od 40% do 60% (bez kondensacji), ciśnienie atmosferyczne od 980 hPa do 1050 hPa, wysokość od 0 do 2000 m n.p.m.
Warunki przechowywania	temperatura od 0°C do 40°C, wilgotność od 40% do 60% (bez kondensacji)
Żywotność diod LED	50 000 godzin świecenia
Stopień ochrony IP	IP20
Materiały	Metal, tworzywo sztuczne
Kąt wiązki światła	30 stopni
Certyfikaty	CE, UKCA, RoHS

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych mających na celu ulepszenie i dalszy rozwój urządzenia oraz do poprawek w przypadku błędów drukarskich.

Utylizacja

W celu ochrony środowiska urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Utylizacja musi odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ekologiczne utylizowanie odpadów elektrycznych zapewnia system zbiórki firmy REMA System, a.s. Jeśli chcesz pozbyć się swojego urządzenia, skontaktuj się z nami pod adresem hello@mitolight.com, a my zorganizujemy bezpłatny odbiór urządzenia z Twojego adresu na całym świecie oraz przetransportujemy je do punktu zbiórki firmy REMA System, a.s.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma MITO LIGHT Logistics s.r.o. oświadcza, że sprzęt elektryczny MITO LIGHT® Intro jest zgodny z następującymi dyrektywami:

2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC), 2011/65/UE (RoHS)

Pełny tekst unijnej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.mitolight.com/declaration-of-conformity

Gwarancja i reklamacje

Urządzenie MITO LIGHT® Intro objęte jest 3-letnią gwarancją.

Jeśli urządzenie było już uszkodzone w momencie odbioru lub wystąpił jakikolwiek problem podczas użytkowania, prosimy postępować zgodnie z instrukcjami pod adresem:

www.mitolight.com/complaints-and-returns

Rozpatrzymy Twoją reklamację w rekordowym czasie!

Warunki reklamacji można znaleźć pod adresem:

www.mitolight.com/complaint-conditions

Obsługa klienta

OBSŁUGA KLIENTA

hello@mitolight.com

+44 330 777 2233

MITO LIGHT Logistics s.r.o.

Nr rejestru: 19262680

Ke Karlovu 1351/13

301 00 Pilzno

Republika Czeska