



ZAAWANSOWANA TERAPIA TECAR

NAJWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ

NAJPROSTSZE UŻYTKOWANIE

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Terapia TECAR: czym jest i jakie korzyści oferuje?

Diatermia kontaktowa – powszechniej znana jako **terapia TECAR** – to zabieg medyczny, który dostarcza fale radiowe do tkanek z częstotliwością w zakresie od 300 kHz do 1 MHz, bez generowania skurczu mięśni.

Ułożenie elektrod na ciele determinuje drogę przepływu prądu, a tym samym zapewnia głęboką, ukierunkowaną, komfortową aplikację, która jest zarówno prosta w obsłudze, jak i zarządzaniu.

Powstające ciepło powoduje efekt wazodylatacji, zwiększa wymianę substancji i stymuluje drenaż w obszarach zapalnych oraz napływ komórek naprawczych.

Terapia TECAR polega na użyciu elektromedycznych urządzeń, które wykorzystują prąd wysokiej częstotliwości do

CHEMICZNEJ | TERMICZNEJ | MECHANICZNEJ

biostymulacji tkanek z różną opornością.

Fizjoterapia, rehabilitacja, terapia w leczeniu bólu czy dermoestetyka to obszary, w których terapia TECAR przynosi znakomite efekty.

- Siniaki i zwichnięcia
- Rehabilitacja pooperacyjna
- Urazy sportowe
- Dysfunkcje mięśni i więzadeł
- Blizny
- Schorzenia kręgosłupa i stawów obwodowych
- Zaburzenia w układzie żylnym i limfatycznym
- Dolegliwości ortopedyczne związane z obwodowym układem nerwowym
- Terapia dna miednicy

Aparat do Terapii Tecar jest najbardziej rozpowszechnionym i jednym z podstawowych urządzeń medycznych w ośrodkach fizjoterapii we Włoszech oraz w Hiszpanii.

**ILOŚĆ URZĄDZEŃ DO TERAPII
TECAR STAŁE POWIĘKSZA SIĘ
NA CAŁYM ŚWIECIE!**

SZEROKI ZAKRES TERAPEUTYCZNY

W stanach ostrych i przewlekłych

Porównanie **terapii TECAR** z innymi urządzeniami elektromagnetycznymi

	LASER WYSOKOENERGETYCZNY	FALA UDERZENIOWA	TERAPIA TECAR	FISIOWARM 7.0
FAZA OSTRA	★★	★	★★	★★★
FAZA PRZEWLEKŁA	★★	★★★★★	★★	★★★
MNIEJSZE OBSZARY	★★★★★	★★★	★★	★★★
DUŻE OBSZARY	★	★★	★★★★★	★★★★★
ZADOWOLENIE PACJENTA	★★	★	★★	★★★★★
GŁĘBOKIE OBSZARY	★	★	★★	★★★
POWIERZCHOWNE OBSZARY	★★★	★★★	★★★	★★★
BEZPIECZEŃSTWO	★★★	★★★	★★	★★★★★

FISIOWARM NA ŚWIECIE

Nasi dystrybutorzy

- BELGIA
- BUŁGARIA
- CHILE
- CHINY
- ESTONIA
- GRECJA
- HONG KONG
- LUKSEMBURG
- MAKAU
- MALTA
- HOLANDIA
- FILIPINY
- POLSKA
- PORTUGALIA
- RUMUNIA
- SERBIA
- SŁOWACJA
- SŁOWENIA
- REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
- KOREA POŁUDNIOWA
- HISZPANIA
- TAJWAN
- TAJLANDIA
- TURCJA
- UKRAINA
- ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE



FISIOWARM NA ŚWIECIE

65/ opracowanych protokołów

5000/ terapeutów na świecie

100/ webinarów i eventów rocznie

50/ szkoleń rocznie na świecie

48/ krajów, gdzie Fisiowarm jest obecny



Dotychczas urządzenia do terapii TECAR posiadały ograniczenia w kwestii wydajności, takie jak:

- Ograniczone zarządzanie głębokością terapii (tylko jedna lub ograniczone częstotliwości).
- Brak efektywności w fazie ostrej spowodowany efektem cieplnym w tradycyjnej terapii TECAR.
- Trudność w dotarciu do niektórych rejonów anatomicznych spowodowana ograniczonym zasięgiem aplikatora.
- Problem z wyborem właściwego protokołu / podejścia do schorzenia pacjenta.
- Ekspozycja operatora na niepożądane działanie pól elektromagnetycznych.
- Ryzyko poparzeń i porażenia prądem.

Fisiowarm 7.0 to najbardziej zaawansowane i najefektywniejsze urządzenie na rynku w terapii dysfunkcji kostno-mięśniowych oraz związanych z obwodowym układem nerwowym.

Najbardziej efektywny

Fisiowarm 7.0 posiada funkcje pozwalające dopasować terapię do potrzeb pacjenta.

- **Frequency on demand** - wybierz najlepszą częstotliwość do swojej terapii w zakresie od 300 kHz do 1 MHz, z regulacją co 1 kHz.
- **Technologia AAW** - nowoczesny wygląd i wydajne cykle. Technologia zapewnia stale zmieniającą się charakterystykę sygnału, tak aby zaadaptować się do pacjenta i do rodzaju aplikacji.
- **HEA** - technologia pozwalająca na zastosowanie terapii biostymulującej o wysokiej mocy, jednocześnie zmniejszając efekt cieplny aż do 10 razy, w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami do terapii Tecar.



Kompleksowy

Fisiowarm® 7.0 gwarantuje najwyższą wydajność oraz nieograniczone możliwości terapeutyczne.

- **Multiemisja:** ciągły, czuły, 4-stopniowy atermiczny poziom regulacji.
- **Akcesoria:** w odniesieniu do tradycyjnych, jednobiegunowych elektrod, urządzenie posiada 8 serii innowacyjnych akcesoriów, dostosowanych do każdej partii ciała.
- **Yuri - rewolucyjne doświadczenie użytkownika:** aplikacja jest dostępna na iPad z systemem iOS poprzez App Store. Prosta i przyjazna użytkownikom aplikacja umożliwia intuicyjną pracę z urządzeniem Fisiowarm 7.0.



Najbezpieczniejszy

Dbając o bezpieczeństwo użytkowników Fisiowarm, od początku wprowadzenia urządzenia na rynek prowadzimy nieustanne badania, rozwijamy i wdrażamy nowe technologie w zakresie bezpieczeństwa.

Fisiowarm to pierwsza jednostka na rynku eliminująca ryzyko porażenia prądem oraz przypadkowego wystąpienia oparzenia. Zapewnia to wbudowany nisko-napięciowy obwód dostosowany nawet do transferów pojemnościowych.

Najnowsze rozwiązania kwalifikują Fisiowarm jako sprzęt klasy B, gdyż przeszedł najbardziej wymagające testy bezpieczeństwa elektronicznego, nawet w przypadku nieprofesjonalnie dobranych ustawień.





WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ W KAŻDYM RODZAJU TERAPII

Obecnie technologia AAW umożliwia Fisiowarm® 7.0 generowanie samoadaptacyjnej fali. Sygnał dostosowuje się w sposób ciągły i automatyczny na podstawie impedancji pacjenta i parametrów ustawionych przez operatora.

Kształt fali AAW w elektroterapii: kształt fali przesyłanego sygnału charakteryzuje jego zachowanie.

Fisiowarm 7.0 ustala kształt fali na wyjściu, optymalizując jej zachowanie w oparciu o proces leczenia i ustalony poziom wyjściowy:

Niskie napięcie

Fisiowarm 7.0 ustala kształt fal, skupiając się bardziej na poziomie mocy (biostymulacja), niż na poziomie energii (efekt cieplny), która jest zredukowana o ponad połowę w stosunku do poziomu nominalnego. Co więcej, przy niskich poziomach wyjściowych specjalny filtr dostosowuje widmo harmoniczne sygnału na podstawie impedancji pacjenta, zwiększając w ten sposób jego skuteczność.

Wysokie napięcie

Fisiowarm 7.0 zmienia kształt fali zwiększając wydajność cieplną do poziomu mocy, zapewniając tym samym większy komfort i bezpieczeństwo, mimo przenoszenia coraz większych ilości energii.





Zmniejszając efekt cieplny i zwiększając efekt stymulujący umożliwia interwencje terapeutyczne nawet w OSTREJ FAZIE.

WYSOKA MOC BEZ PODNOSZENIA TEMPERATURY


W urządzeniu Fisiowarm do terapii TECAR dostępna jest funkcja SUPERPULSED.

To jedyne urządzenie, które umożliwia terapię pacjentów w ostrej fazie, poprzez przenoszenie energii o wysokiej częstotliwości.

W rzeczywistości, dzięki mikroimpulsom o wysokiej intensywności, wzrost temperatury w obszarze poddanym zabiegowi jest bliski zeru.

Sygnał wyjściowy jest modulowany przez aktywację krótkich, wysokoenergetycznych impulsów powstających tysiące razy na sekundę z wyjściowych zasobów energii.

W zależności od zabiegu czas trwania impulsów może być od 5 do 10 razy krótszy od całkowitego czasu emisji, co oznacza 5 do 10 razy mniejszą moc cieplną, wygenerowaną przy tym samym poziomie aplikowanego napięcia.

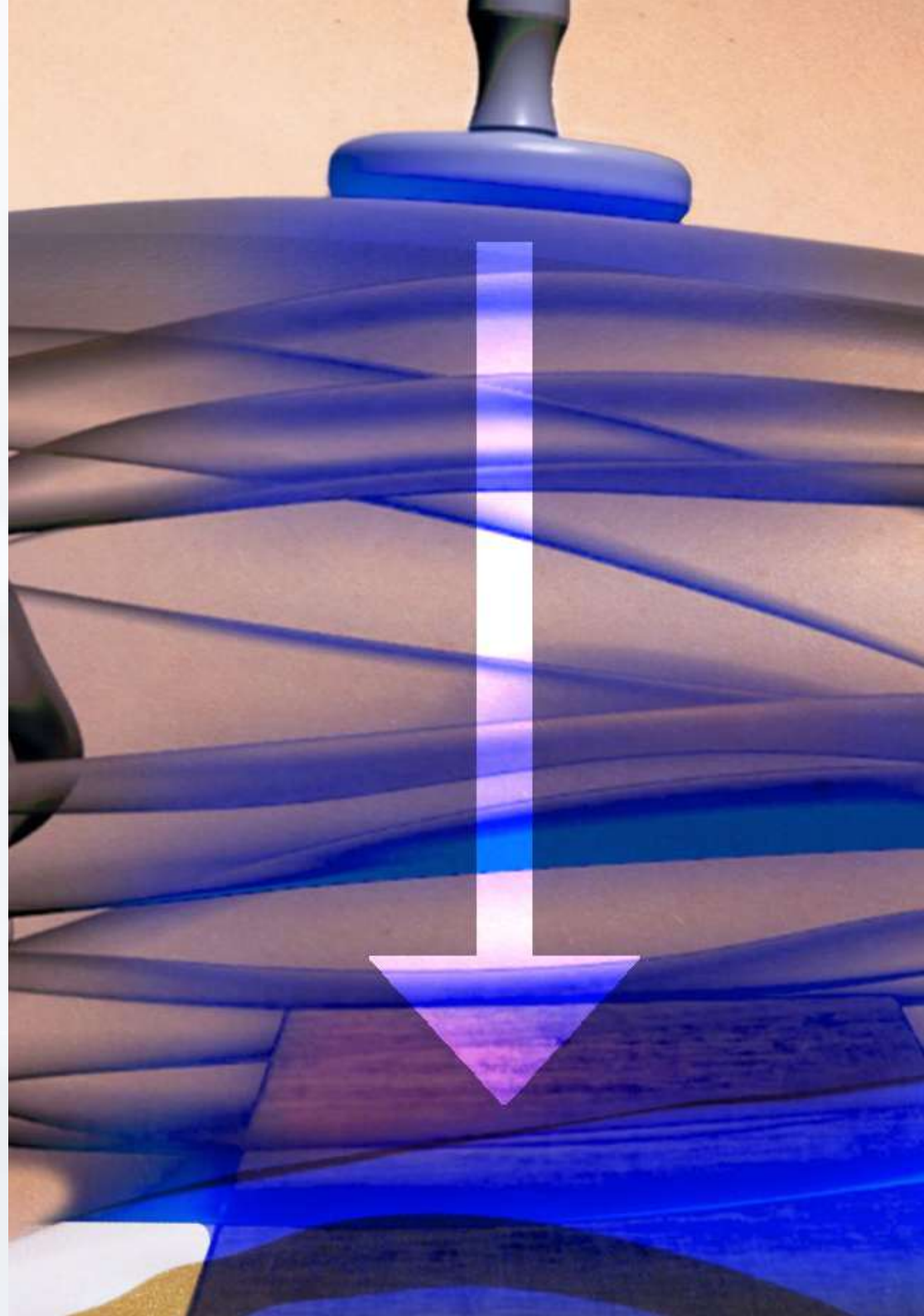




FREQUENCY ON DEMAND

Po raz pierwszy aparat do terapii Tecar pozwala wybrać najbardziej odpowiednią częstotliwość w zakresie od 300 kHz do 1 MHz, z regulacją co 1 kHz.

W ten sposób możesz dokładnie dobrać głębokość, na jakiej energia jest uwalniana i zwiększyć lub zmniejszyć głębokość zabiegu.

Istnieje także możliwość ustawienia wartości na podstawie najczęściej wybieranych lub w oparciu o wartości ze specjalistycznych publikacji oraz materiałów klinicznych.

OZNACZA TO, ŻE ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI MOŻE ZOSTAĆ DOPASOWANY DO WSZYSTKICH WYMAGANYCH WARTOŚCI I ZASTOSOWAŃ.

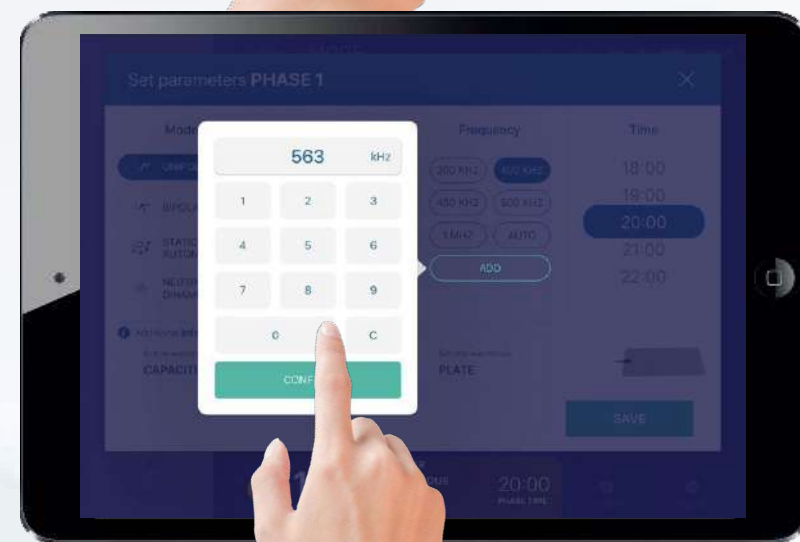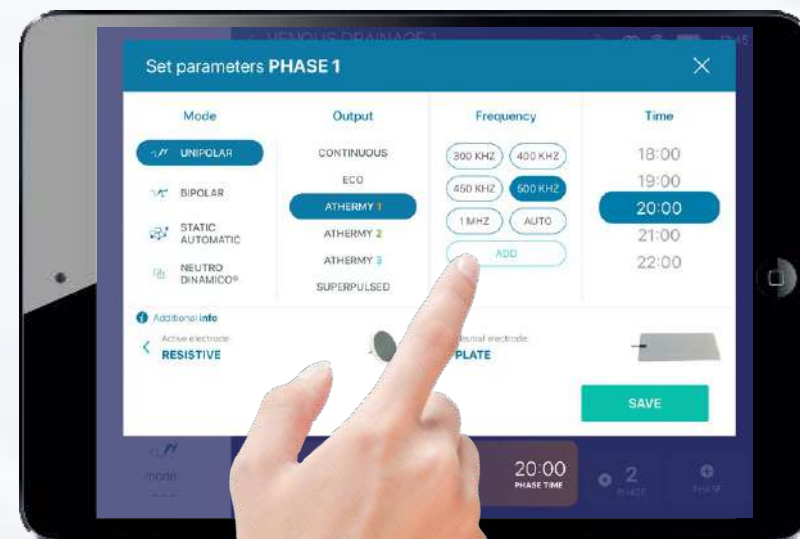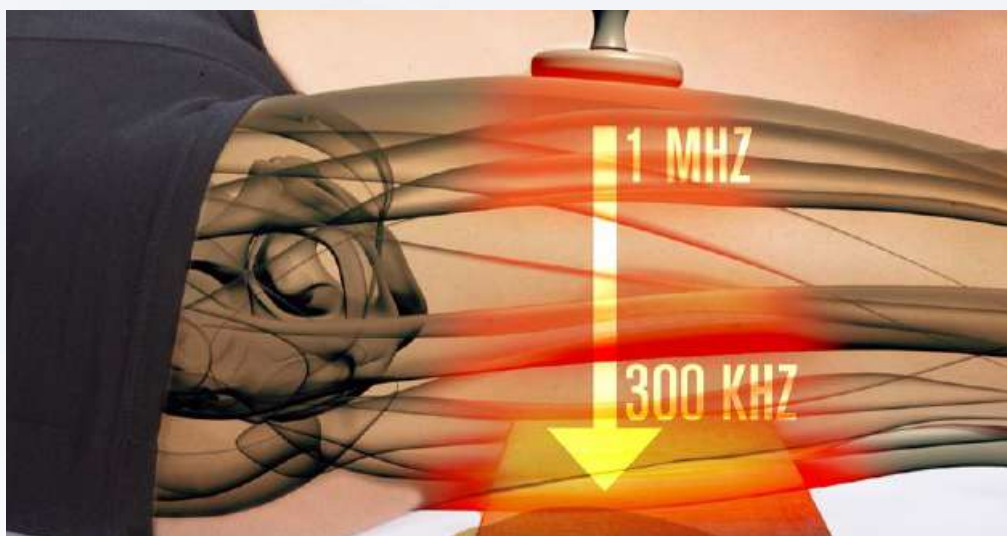



DLA BEZPIECZNEJ, KOMFORTOWEJ I WYSOCE SKUTECZNEJ APLIKACJI

W pełni osłonięta elektronika i specjalna technologia produkcji ograniczająca „efekt powietrzny”.

Specjalne kable stworzone do transmisji sygnału zachowujące swój kształt i elastyczność przez długi czas.

Bardziej skoncentrowany sygnał zapewniający lepszą wydajność i zgodność z automatycznie modulowanym sygnałem wyjściowym.

Stale zmieniający się obwód pacjenta.



LOW VOLTAGE CAPACITIVE

Niskonapięciowe elektrody pojemnościowe z wysoce przewodzącym i biokompatybilnym złotem (1 mikron) oraz z obwodami zaprojektowanymi dla terapii różnych obszarów.



MINIMALNA DYSPERSJA CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ

FISIOARM 7.0 POZYTYWNIIE PRZESZEDŁ WSZYSTKIE NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCE TESTY I JEST KLASYFIKOWANY JAKO KLASA B DLA PROMIENIOWANIA ORAZ PROWADZENIA EMISJI WEDŁUG STANDARDÓW EN 60601-1-2, KTÓRE OZNACZAJĄ, ŻE JEST ZUPEŁNIE BEZPIECZNY, NAWET PRZY NIEPROFESJONALNYCH USTAWIENIACH.



NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANE DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

Po raz pierwszy urządzenie może być kontrolowane za pomocą aplikacji, aby uprościć i uatrakcyjnić interakcję pomiędzy użytkownikiem, a urządzeniem.

W ten sposób każdy użytkownik może swobodnie i dynamicznie zarządzać parametrami, dzięki zdalnemu sterowaniu poprzez łączność Bluetooth.




Aplikacja YURI zapewnia:

1. Możliwość ustawienia wszystkich parametrów pracy na ekranie iPada, przy jego dogodnym umiejscowieniu.
2. Możliwość zaprogramowania protokołów, tak by w pełni wykorzystać potencjał sprzętu i szeroką gamę akcesoriów do terapii różnych schorzeń.
3. Zaawansowane tryby terapii.
4. Feedback terapii pacjenta wraz z wykresami dla intuicyjnego przeglądania i kontroli przebiegu terapii.
5. Oprogramowanie do monitorowania pacjenta oraz postępów terapeutycznych.

Dla rewelacyjnego doświadczenia terapii:

- Zmniejsza rozproszenia
- Poprawia komfort pacjenta

Fisiowarm 7.0 i Yuri razem z najnowszą dostępną technologią dla iPada zapewniają wyjątkowy komfort użytkownika.

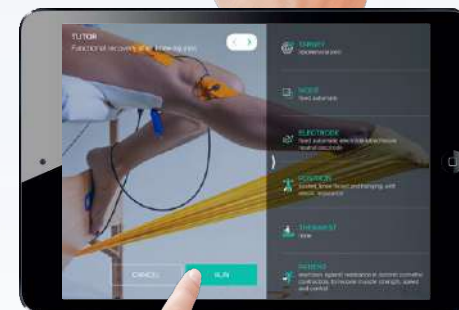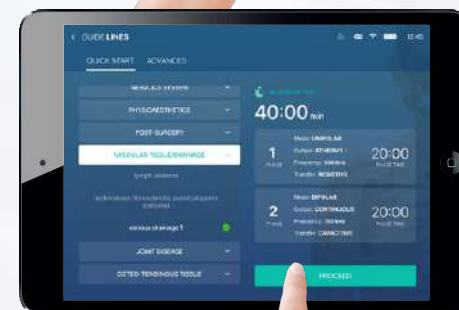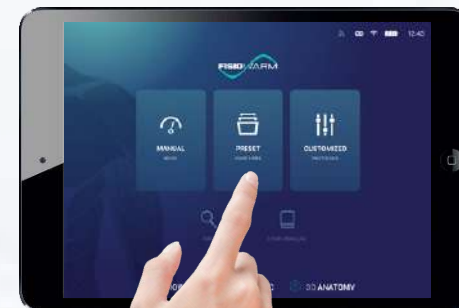


40+ AKCESORIA

40+ **AKCESORIÓW**, aby zapewnić pełen zakres aplikacji przy dolegliwościach mięśniowo-szkieletowych, estetycznych, czy dysfunkcjach dna miednicy.



7.0 JEDNOBIEGUNOWE

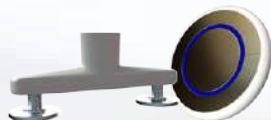

7.0 DWUBIEGUNOWE



7.0 UNIQ



7.0 DERMOLIFT



7.0 UNIPointer



7.0 IASTM



7.0 INTIMITY



7.0 STATIC AUTOMATIC



7.0 NEUTRO DINAMICO®



7.0 OCTOPUS

NAJBARDZIEJ WYDAJNE I KOMPLEKSOWE URZĄDZENIE DO DIATERMII

TERAPIA
MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWA

SPORT

UROGINEKOLOGIA

ZABIEGI
DERMO FUNKCJONALNE



TERAPIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWA



Dostarczając określoną ilość energii, terapia TECAR zwiększa przepływ krwi, przez co **poprawia odżywienie i dotlenienie komórek oraz przyspiesza eliminację toksyn.**


Poprawia również elastyczność tkanki łącznej, zmniejsza sztywność stawów, łagodzi bolesność i napięcie mięśni oraz ułatwia wchłanianie krwiaków i obrzęków.

Dzięki tej energii każda komórka stymulowana jest do regeneracji poprzez oddziaływanie morfologiczne, chemiczne i elektryczne.

Rozszerzenie naczyń krwionośnych związane z efektem cieplnym **zwiększa wymianę substancji**, wspomagając drenaż w obszarze objętym stanem zapalnym i napływ komórek naprawczych.

Terapia TECAR jest pomocna przy:

- schorzeniach stawowych,
- rehabilitacji stawów,
- skręceniach i zwichnięciach,
- schorzeniach mięśniowych,
- rehabilitacji pooperacyjnej,
- dolegliwościach związanych z uprawianiem sportu,
- ostrym i przewlekłym bólu,
- terapii blizn,
- tendinopatii.

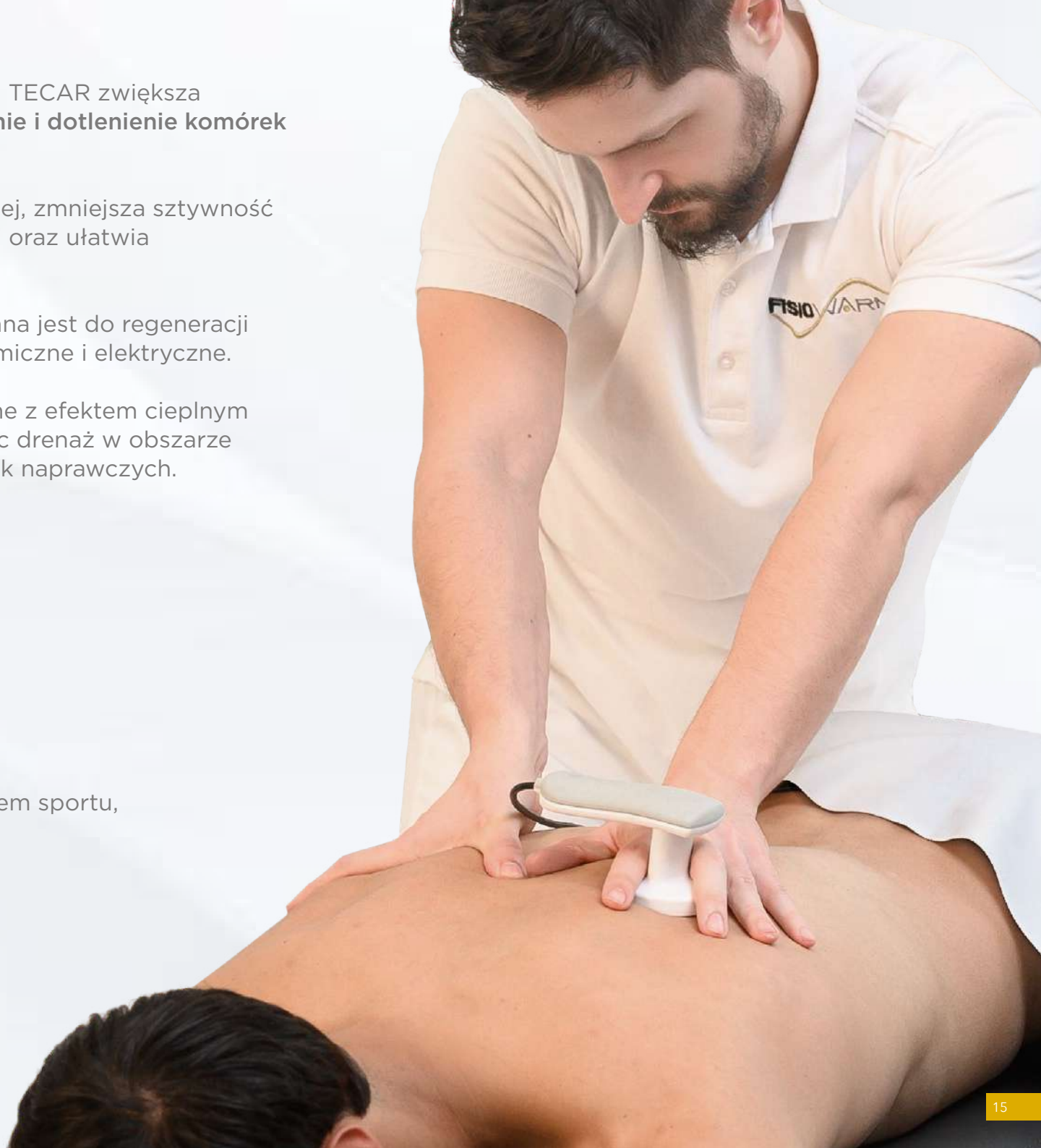

SPORT



Zapobieganie kontuzjom, przyspieszanie regeneracji po urazach i poprawa elastyczności mięśni ma fundamentalne znaczenie dla profesjonalnych i amatorskich sportowców.

TERAPIA TECAR POMAGA SPORTOWCOM W:

- przyspieszeniu regeneracji po urazach mięśni,
- poprawie elastyczności stawów i mięśni w celu zapobiegania urazom,
- przyspieszeniu powrotu do formy po urazach spowodowanych przeciążeniem,
- poprawie wydajności poprzez zabiegi wykonywane przed zawodami,
- zmniejszeniu ryzyka urazów,
- rehabilitacji stawów,
- skręceniach,
- zaburzeniach mięśniowych,
- rehabilitacji pooperacyjnej,
- ostrym i przewlekłym bólu,
- terapii blizn,
- tendinopatii.




UROGINEKOLOGIA



Rehabilitacja dna miednicy koncentruje się na **poprawie trofiki, przyspieszeniu procesów regeneracyjnych oraz poprawie siły i wytrzymałości mięśni krocza**, aby wspierać narządy miednicy mniejszej i wzmacniać zwieracz cewki moczowej.

Zabiegi TECAR są szczególnie skuteczne w rekonwalescencji po porodzie i operacjach ginekologicznych oraz w terapii dysfunkcji takich jak:

- wulwodynia,
- dyspareunia (bolesne współżycie),
- pochwica,
- nietrzymanie moczu,
- wypadanie macicy,
- zwiększone napięcie mięśni dna miednicy.

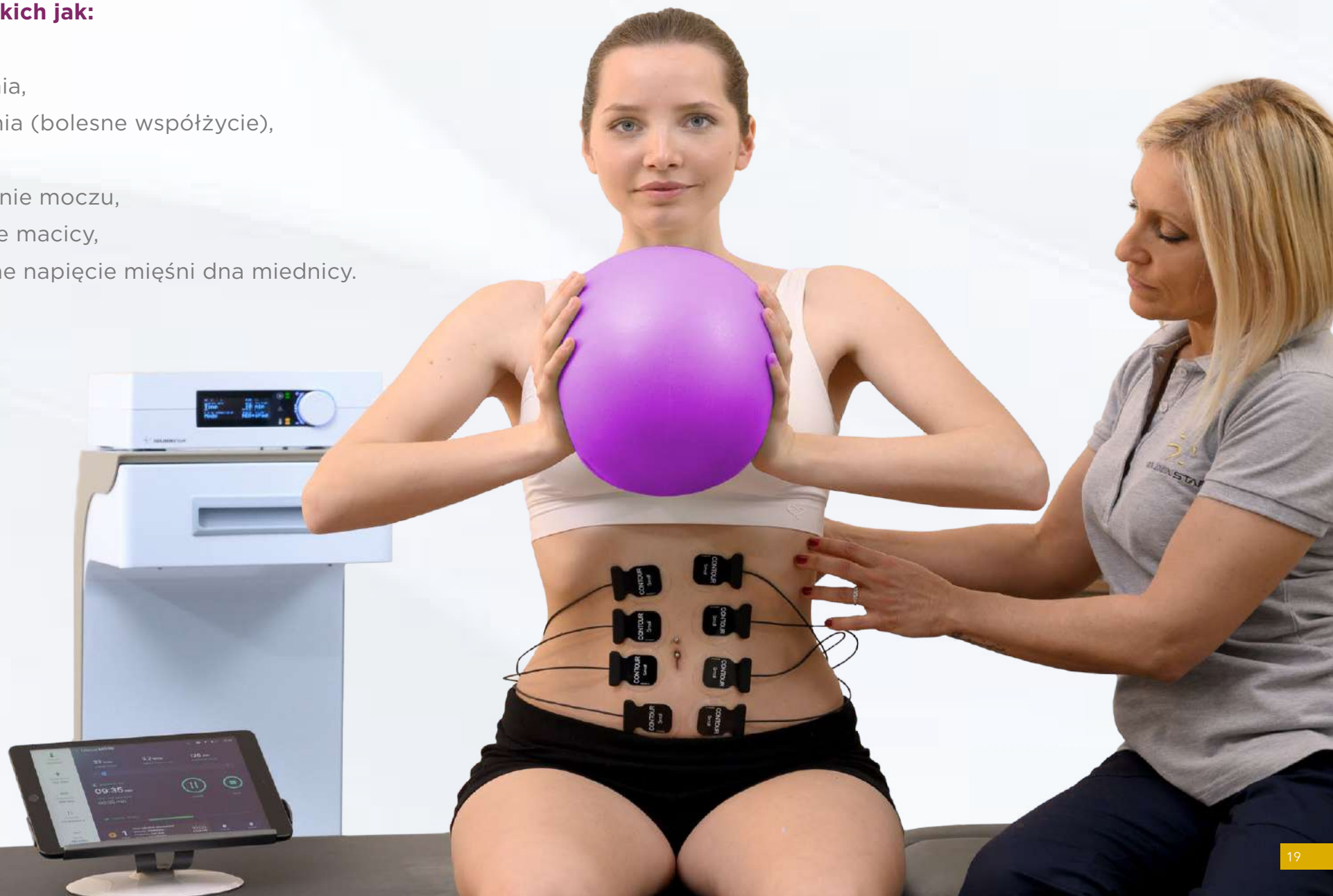

ZABIEGI DERMO FUNKCJONALNE



Fizjoterapia dermo funkcjonalna koncentruje się na **ocenie i wsparciu leczenia zaburzeń strukturalnych, estetycznych i funkcjonalnych**, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na układ powłokowy.

Innymi słowy, fizjoterapia dermo funkcjonalna zajmuje się **estetycznymi oraz funkcjonalnymi zmianami skóry**, w celu poprawy jej stanu.

Fizjoterapia dermo funkcjonalna dzieli się na dwa główne obszary: **terapię estetyczną i terapię regeneracyjną**.

Terapia estetyczna jest pomocna przy:

- starzeniu skóry (zmarszczkach, ciemnych plamach, skórze pozbawionej witalności),
- otyłości i zespołach metabolicznych,
- zwiotczałej skórze i mięśniach,
- obrzękach limfatycznych i/lub żylnych,
- cellulicie,
- rozstępach,
- miejscowym odkładaniu tkanki tłuszczowej,
- trądziku,
- stanach przed i po zabiegach chirurgicznych.

Terapia regeneracyjna stosowana jest na:

- oparzenia,
- blizny,
- owrzodzenia.



ELEKTRODY JEDNOBIEGUNOWE






W **trybie jednobiegunowym** ścieżka przebiegu energii definiowana jest przez położenie elektrody aktywnej i neutralnej.

Transfer energii oparty jest na wybranej elektrodzie – pojemnościowej lub oporowej.

Aplikacje **jednobiegunowe** stosowane są **do terapii głębiej położonych tkanek** (np. przy zwyrodnieniu stawu biodrowego) lub do zabiegów **na większym obszarze** (np. przy rwie barkowej).

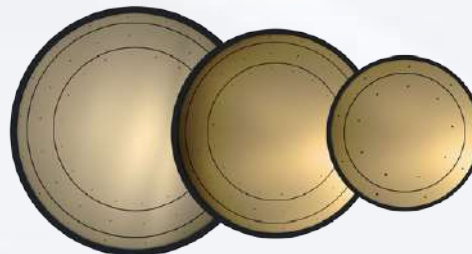

ELEKTRODY DWUBIEGUNOWE







Zabiegi TECAR z wykorzystaniem elektrod dwubiegunowych nie wymagają użycia płytki neutralnej. Dzięki temu umożliwiają zwiększenie komfortu i dynamiki podczas terapii.

Aplikacje dwubiegunowe pozwalają terapeutce na precyzyjną stymulację wybranej tkanki i dynamiczniejszą terapię, a także zwiększają komfort pacjenta podczas zabiegu. Umożliwiają również połączenie ćwiczeń i stymulacji biologicznej podczas jednej sesji, co byłoby bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe do osiągnięcia przy użyciu systemu jednobiegunowego.

Tryb **dwubiegunowy** koncentruje energię pomiędzy elektrodami.

Wykorzystywany jest do terapii mniejszych obszarów lub tkanek powierzchniowych, m.in. przy uszkodzeniu stawu barkowo-obończykowego, obrzęku, czy zespole cieśni nadgarstka.

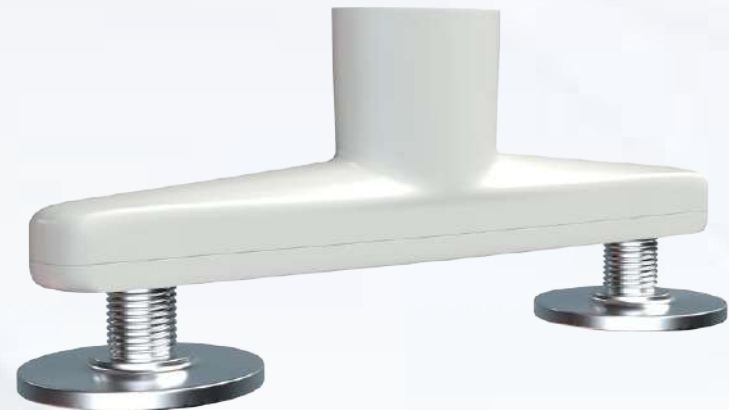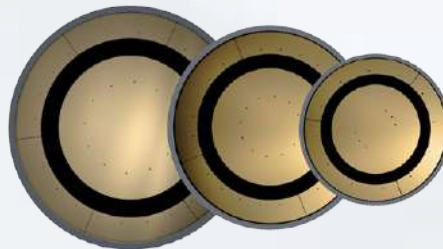

TERAPIA POWIĘZIOWA





IASTM ONE to wypukła szpatułka przeznaczona do kompleksowej terapii mięśniowo-powięziowej (zarówno tkanki mięśniowej, jak i łącznej). **Narzędzie przydatne do:** terapii powierzchownych zwłóknień i blizn, manipulacji powięzi, czy przygotowania tkanek do kinesiotapingu.

IASTM TWO to wklęsło-wypukła szpatułka do terapii powięziowej grup mięśniowych o średniej wielkości (takich jak mm. ramienia, przedramienia, czy przykregostupowe). Mniejsza główka umożliwia opracowanie **elementów ścięgniastych**.

IASTM THREE dedykowana jest do zabiegów na obszarach o mniejszej powierzchni, takich jak staw skroniowo-żuchwowy, czy mięśnie szyi. Mniejsza główka umożliwia również terapię punktów spustowych. **Narzędzie przydatne do:** manipulacji powięzi (wszystkie uznane metody), terapii punktów spustowych, czy głębokiego masażu poprzecznego.



INTIMITY – elektrody do terapii dna miednicy






Rehabilitacja dna miednicy (zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet) **ma na celu poprawę wydolności mięśni krocza**. Dzięki temu **mogą one lepiej spełniać swoje funkcje**, do których należy podtrzymywanie narządów wewnętrznych w miednicy i wzmacnianie zwieraczy.

Elektrody dedykowane do wewnętrznej terapii schorzeń i dysfunkcji w rejonie dna miednicy nazywane są sondami (dopochwowymi i analnymi).

Terapia z użyciem sond **Intimity** może pomóc w procesie leczenia zaburzeń czynnościowych, takich jak:

- **dysfunkcje układu moczowego,**
- **dysfunkcje jelit,**
- **dysfunkcje seksualne,**
- **wypadanie macicy,**
- **bolesność w obrębie miednicy.**

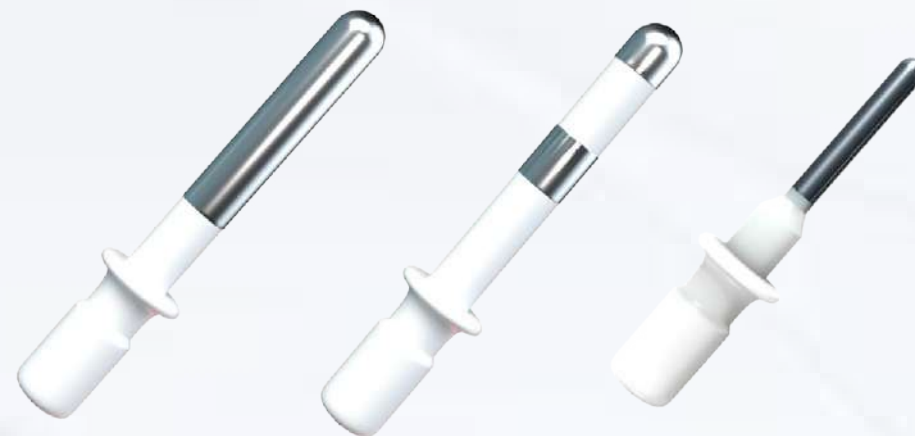


DERMOLIFT – elektroda do twarzy





Zabiegi TECAR sprawiają, że skóra staje się bardziej elastyczna i zrelaksowana. Poza tym terapia redukuje zmarszczki, zmniejsza obrzęk i uczucie ciężkości oraz wyraźnie poprawia ogólny wygląd estetyczny.

Dwubiegunowa elektroda **Dermolift** została zaprojektowana specjalnie dla potrzeb twarzy. Dzięki konstrukcji z dwoma głowicami umożliwia **komfortowe przeprowadzenie zabiegu na wszystkich delikatnych obszarach twarzy, takich jak okolice oczu, usta i policzki.**

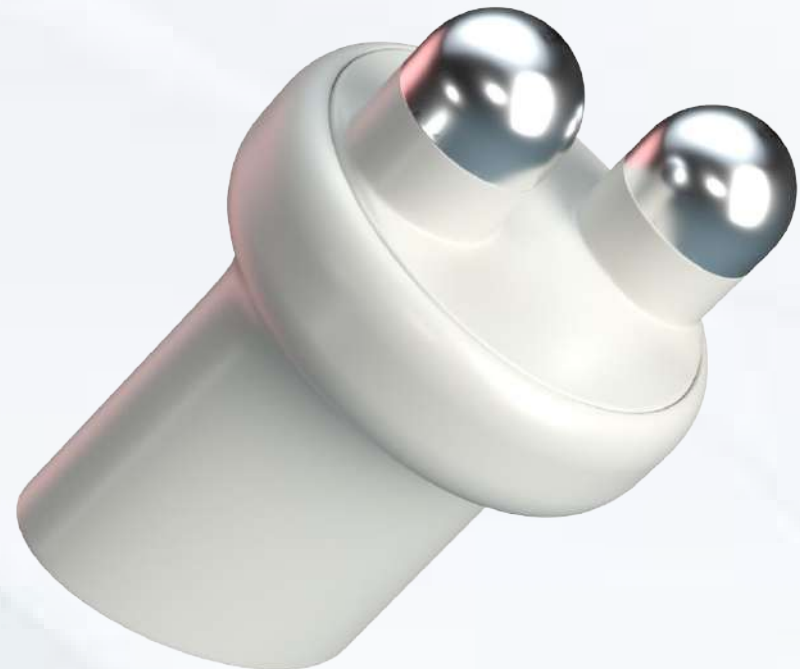

NEUTRO DINAMICO®






Konfiguracja Neutro Dinamico® pozwala na pracę z mobilnym wykorzystaniem obu biegunów (neutralnego i aktywnego). W systemie tym zamiast nieruchomo ułożonej płytki neutralnej wykorzystywana jest rękojeść trzymaną przez terapeutę, dzięki której może on modyfikować pole zabiegowe. System ten **umożliwia opracowanie całego mięśnia od przyczepu początkowego do końcowego** i pracę w bardziej efektywnej geometryce, bez rozpraszania energii na inne obszary.

Nareszcie możesz sterować przepływem energii za pomocą własnych rąk i **tworzyć niestandardowe ścieżki**. Korzystaj z serii 3 elektrod o różnych rozmiarach, aby stworzyć **indywidualnie dopasowaną geometrię zabiegu**.

System Neutro Dinamico® pozwala na operowanie dwoma elektrodami, a przez to przeprowadzenie specyficznej terapii (np. dla stawu) **o określonej głębokości i ukierunkowanej ścieżce przepływu energii**.

Umożliwia to swobodną mobilizację i wykonywanie ćwiczeń przez pacjenta – nie musi on pozostawać w stałej pozycji ze względu na płytkę neutralną.

System jest przydatny w terapii m.in.:
choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego,
zamrożonego barku, ACL, uszkodzenia
łąkotki czy cellulitu.

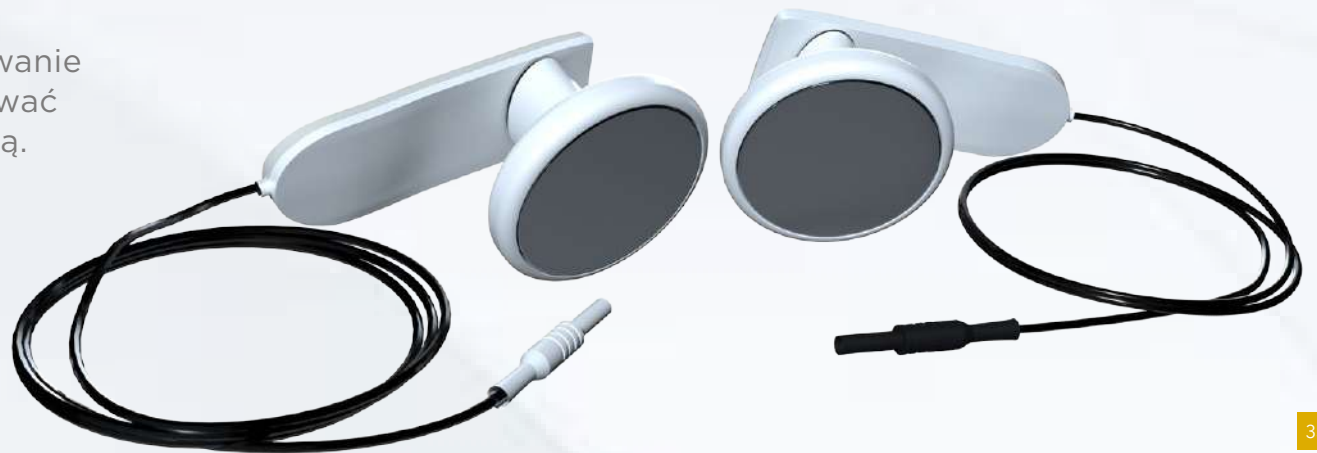

UNIPointer – elektroda punktowa





Unipointer to lekka elektroda z ergonomicznym uchwytem, przeznaczona do wszystkich zabiegów wymagających dużej precyzji i dokładności.

Umożliwia terapię przy niewielkich obszarach, takich jak stawy skroniowo-żuchwowe, punkty spustowe i obszary ścięgnowe.

Kształt samej elektrody został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić zastosowanie nacisku odpowiedniego do kluczowych punktów.



ELEKTRODY STATYCZNO-AUTOMATYCZNE





Akcesorium składa się z serii 4 elektrod, które można dowolnie umieszczać na ciele w różnych odległościach oraz samoprzylepnej elektrody zawierającej materiał przewodzący i bezpieczne złącze.

Pozwala operatorowi wybrać obszar zabiegu lub ścieżkę przepływu energii. To przydatne rozwiązanie, które umożliwia pracę z niezależnymi geometriami, a także **zwiększenie efektywności terapii poprzez połączenie TECAR z aktywnymi ćwiczeniami podczas jednej sesji.**



SYSTEM OCTOPUS



Output 150 Vrms
Time > 30 min
Frequency 500 kHz
Mode UNI+iPad

GOLDENSTAR



Innowacyjny system składający się z 8 elastycznych elektrod Contour, które zostały wykonane z kaptonu i pokryte złotem dla zapewnienia maksymalnego przewodnictwa. Elektrody dostosowują się do kształtu ciała i idealnie przylegają do skóry pacjenta.

Charakterystyka technologii Octopus umożliwia operatorom pozycjonowanie elektrod (o różnych rozmiarach) w określony sposób nad obszarem docelowym. Pozwala to na **optymalizację uwalniania energii** w trybie jednobiegunowym (z płytką neutralną) lub dwubiegunowym (bez płytki neutralnej).

Ten wszechstronny system w jednym czasie może być stosowany w połączeniu z kinezyterapią czy rehabilitacją funkcjonalną, a także w trybie “niezależnym od operatora”.



UNIQ




TRYB POJEMNOŚCIOWY I OPOROWY W JEDNEJ ELEKTRODZIE

Uniq to innowacyjna elektroda do terapii jednobiegunowej, która łączy w sobie dwa tryby transferu energii – pojemnościowy i oporowy.

Umożliwia jednoczesną terapię tkanek powierzchniowych (elektroda pojemnościowa) i głębokich (elektroda oporowa). Dzięki temu skraca czas zabiegu o połowę, a jednocześnie zapewnia podwójną skuteczność.

Znajduje zastosowanie w terapii schorzeń w tkankach powierzchniowych i głębokich, takich jak np.:

- dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego,
- skręcenia stawów z obrzękiem,
- urazy mięśni z obrzękiem,
- stan po interwencji chirurgicznej,
- zamrożony bark,
- złamania,
- zapalenie ścięgien.

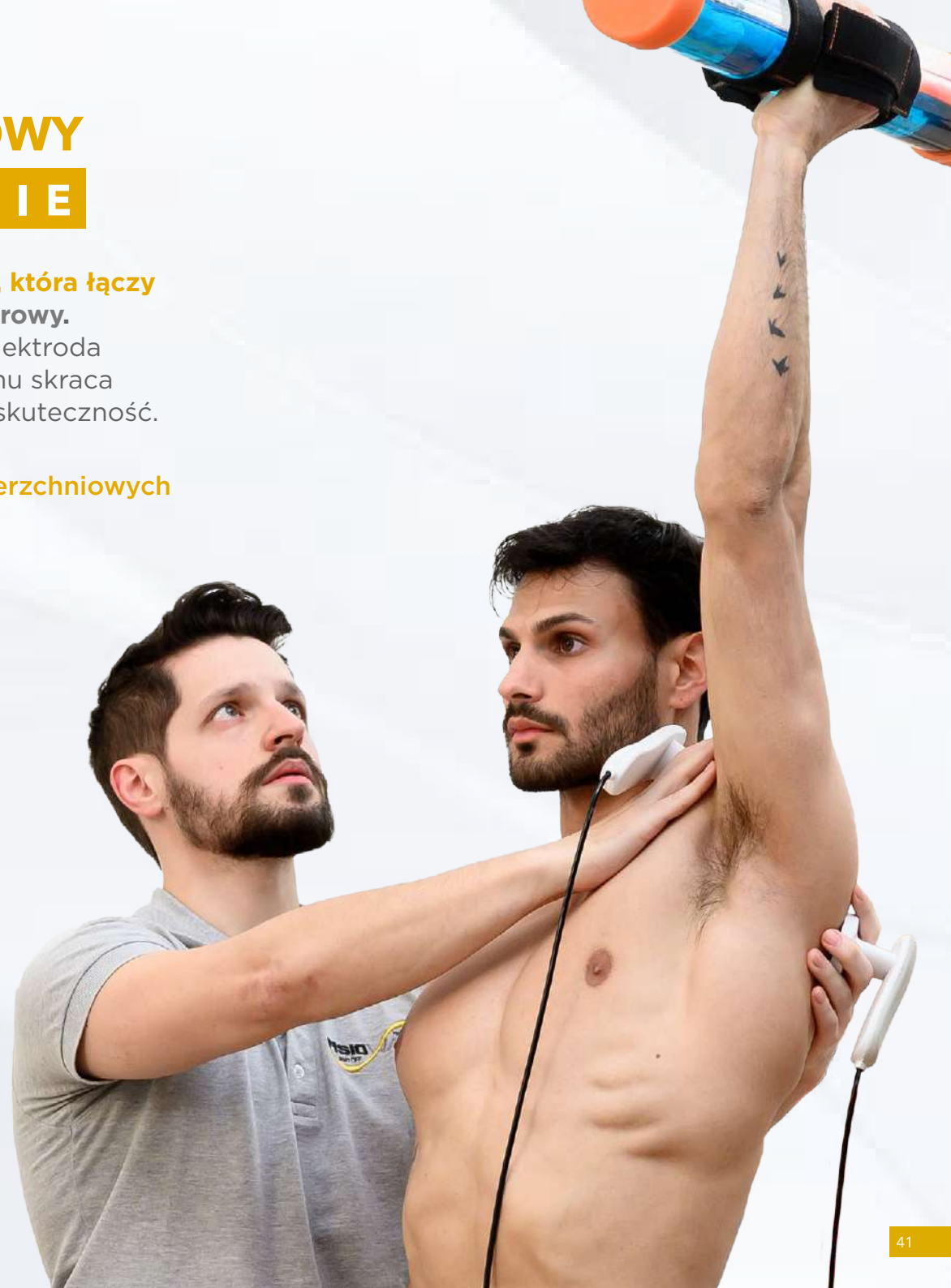


Fisiowarm 7.0 – porównanie modeli

	FISIOWARM 7.0 300	FISIOWARM 7.0 400
INTERFACE	- Aplikacja Fisiowarm na iPad (w zestawie) - Wyświetlacz OLED i enkoder obrotowy z wielofunkcyjnym przyciskiem	- Aplikacja Fisiowarm na iPad (w zestawie) - Wyświetlacz OLED i enkoder obrotowy z wielofunkcyjnym przyciskiem
MOC NOMINALNA	300 Wat	400 Wat
CZĘSTOTLIWOŚCI	300, 500 kHz, 1MHz	- Dowolne ustawianie wartości w zakresie od 300 kHz do 1 MHz. 300, 500 kHz, 1 MHz - Zaprogramowane częstotliwości: 300, 400, 450, 500 kHz, 1MHz AUTO (automatyczne skanowanie zaprogramowanych częstotliwości)
EMISJA	Ciągła Delikatna Atermiczna	Ciągła Delikatna Atermiczna 1/2/3 Superpulsed
TRYBY PRACY	Jednobiegunowy Dwubiegunowy Neutro Dinamico® Static Automatic®	Jednobiegunowy Dwubiegunowy Neutro Dinamico® Static Automatic®
AKCESORIA W ZESTAWIE	Zestaw elektrod jednobiegunowych (poj. + rez.) Zestaw elektrod dwubiegunowych (poj. + rez.) Wózek z 2 półkami z których jedna jest podgrzewana	Zestaw elektrod jednobiegunowych (poj. + rez.) Zestaw elektrod dwubiegunowych (poj. + rez.) Wózek z półką i podgrzewaną szufladą na akcesoria
KOMPATYBILNE AKCESORIA	Pełna gama akcesoriów	Pełna gama akcesoriów
TRANSFER ENERGII	Pojemnościowy Oporowy	Pojemnościowy Oporowy
ZDEFINIOWANE PROGRAMY	56 programów, które można zintegrować z nowymi wersjami aplikacji i trybami zaawansowanymi	56 programów, które można zintegrować z nowymi wersjami aplikacji i trybami zaawansowanymi

Fisiowarm 7.0 dla klubów i federacji sportowych

Narodowe federacje sportowe oraz profesjonalni sportowcy stosują Fisiowarm jako integralny element terapii. Dynamika działania i wysoka skuteczność terapeutyczna są kluczowe w procesie terapeutycznym osób, dla których osiągnięcie optymalnych rezultatów jest priorytetem.

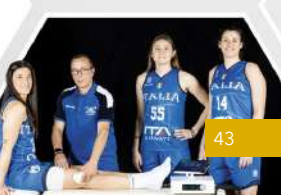

70

FISIOWARM
70

ZAAWANSOWANA TERAPIA TECAR

www.fisiowarm.com



20 lat doświadczenia Golden Star w Terapii Tecar i ponad 70-letnia historia doprowadziły do powstania najlepszego produktu na rynku.

Po latach ciągłych innowacji jesteśmy jedynymi, którzy przekroczyli swoje granice i zostawili konkurencję z tyłu.

Zrobiliśmy to przy użyciu najbardziej zaawansowanej technologii, najlepszych dostępnych materiałów i współpracy z fizjoterapeutami, aby stworzyć nowe akcesoria i nowe aplikacje.

Fisiowarm 7.0 to więcej niż niezwykle urządzenie. To wszystko, czego kiedykolwiek mogłeś oczekiwać od urządzenia do terapii Tecar, w nowoczesnym i estetycznie zaprojektowanym produkcie.

Fisiowarm 7.0 zapewnia najwyższą jakość terapii Tecar, ponieważ wierzymy, że nie może być nic lepszego od niej!

Jesteśmy pewni jakości naszego urządzenia, dlatego oferujemy dożywotnią gwarancję*

* Ograniczona „Dożywotnia Gwarancja” udzielana przez nas obejmuje okres 6 lat od daty pierwotnego zakupu urządzenia Fisiowarm® 7.0. Szczegółowe warunki, ograniczenia oraz zasady obowiązywania „Dożywotniej Gwarancji” znajdują się w naszej Deklaracji Gwarancji Ograniczonej.**

StrefaRegeneracji^{PL}

OFICJALNY DYSTRYBUTOR
STREFA REGENERACJI S.C.
ul. T. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów

info@strefaregeneracji.pl
www.strefaregeneracji.pl



Linia urządzenia Fisiowarm® jest projektowana i produkowana we Włoszech

Informacje i treści zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są prawnie wiążące.

CE
1370